

ÜCRETSİZ YEDEK PARÇALAR (GARANTİ)

Tutma kayışı, konfor bantları ve garantisi dolmuş yedek parçalar dışında tüm parçalar 36 ay garantili olup ücretsiz olarak gönderilir. (Firmamızın Genel Şirket Şartnamesine bakınız):

- Fatura tarihine bakarak PeniMaster® aletinizin 3 yıldan eski olup olmadığını kontrol edin.
- Anızal parçayı, faturanın bir kopyası ile birlikte paketin üzerine yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese postalayınız. VEYA
- Fatura belgesinden iyi derecede okunabilir dijital bir kopya yapın (örneğin tarayıcı ile) ve arızalı parçanın arızalı bölümü açıkça görülebilecek şekilde fotoğrafını çekin. Fatura kopyası ve fotoğrafı .jpg- ve/veya .gif-dosyası olarak şu e-mail adresine gönderin:
→ www.penis.de

TUTMA KAYIŞLARI, KONFOR BANTLARI VE GARANTİSİ DOLMUŞ PARÇALAR

Tutma kayışları, konfor bantları ve garantisi dolmuş aletler için yapılacak yedek parça siparişlerinde şu internet adresini kullanın: www.penis.de/yedek-parcalar

GRATIS RESERVEDELE (GARANTİ)

I 36 måneder erstatter vi alle dele med gratis reserve dele undtagen holde remme, komfortbånd og reserve dele med forfalden garanti (se vore AGB):

- Kontrollér med hjælp af fakturadatoen om din PeniMaster® er ældre end 3 år.
- Returnér defekte del sammen med en fakturakopi til nedestående adresse. Husk tilstrækkelig porto. ELLER
- tilsend os en tydelige læselig (bedre læselig) digital fakturakopi (fx ved hjælp af en scanner) og et billede af defekte del, hvorpå defekten tydeligt kan ses. Tilsend begge dokumenter som jpg- og/eller gif-filer til:
→ www.penis.de

HOLDEREM, KOMFORTBÅND OG RESERVEDELE MED FORFALDEN GARANTİ

Bestil holderemme, komfortbånd eller også reserve dele til apparater uden garantikrav på følgende hjemmeside www.penis.de/reserve dele

KOSTELOZE RESERVEONDERDELEN (GARANTIE)

U ontvangt gedurende 36 maanden kosteloze reserveonderdelen met uitzondering van de houderriemen, comfortbanden en reserveonderdelen met afgelopen garantie (zie onze Algemene Voorwaarden):

- Controleer met behulp van de factuurdatum dat uw PeniMaster® niet ouder dan 3 jaar is.
- Stuur het defecte onderdeel samen met een kopie van de factuur in een voldoende gefrankeerd poststuk naar beneden vermeld adres. □F
- Maak een goed leesbare digitale kopie van uw factuur (bijv. met een scanner) en een foto van het defecte onderdeel waarop het defect duidelijk te herkennen is. Stuur de twee documenten als .jpg- en/ of .gif-bestanden naar: → www.penis.de

HOUDERRIEMEN, COMFORTBANDEN EN RESERVEONDERDELEN MET AFGELOPEN GARANTIE

Gebruik voor de bestelling van reserveonderdelen voor toestellen zonder garantierecht, houderriemen of comfortbanden het volgende internetadres: www.penis.de/onderdelen



Gebruiksaanleitung! Bitte aufmerksam lesen! Instructions for use! Please read carefully. Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement avant utilisation! Istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'uso! Instrucciones de uso. ¡Leer atentamente antes de usarlo! Manual de instruções! Leia com atenção! Lutfen kullanna klavuzunu dikkatlice okuyunuz! Betjeningsvejledning! Læses opmærksomt! Gebruiksaanwijzing! A. u. b. zorgvuldig doorlezen! Bruksanvisning! Läs igenom uppmärksamt! Návod k použití! Prosíme čtěte pozorně! Руководство по применению! Пожалуйста, прочтеть внимательно!

PENIMASTER®



Zur dauerhaften Penisvergrößerung und -begradigung For permanent penis enlargement and straightening Pour un allongement et une correction durable du pénis Per un ingrandimento ed un raddrizzamento del pene duraturi Para agrandar y reajustar la curvatura del pene de manera duradera Para aumentar e endireitar o pénis de forma duradoura Kalıcı penis büyütmeye ve düzeltmeye için Til varig penis forstørrelse og udbedring af krumning Voor een duurzame penisvergroting en -correctie För varaktigt penisförstoring och -uträtning Pro trvalé zvětšení a napřimení penisu Для долговременного увеличения и Для долговременного увеличения и

 **WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT IHREM PENIMASTER®!**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.penis.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Es gelten unsere AGBs. Stand dieser Information: 04/2008

 **WE HOPE YOUR PENIMASTER® LEADS TO GREAT SUCCESS AND SATISFACTION!**

You can find further information on the internet at www.penis.de

We reserve the right to make changes that constitute technical improvements (See our general terms and conditions). Date of this information: 04/2008

 **NOUS ESPÉRONS QUE LE PENIMASTER® VOUS APPORTERA PLAISIR ET SATISFACTION!**

Informations complémentaires sur Internet: www.penis.de

Sous réserve de modifications susceptibles d'apporter une amélioration technique. Version de ces informations: 04/2008

 **LE AUGURIAMO OGNI SUCCESSO CON IL SUO PENIMASTER®!**

È possibile trovare ulteriori informazioni in internet al sito www.penis.de

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali d'affari. Stato della presente nota informativa: 04/2008

 **¡LE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN QUE MERECE CON SU PENIMASTER®!**

Información más detallada disponible en Internet en la página www.penis.de

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Rígen nuestras CGC. Actualización de la presente información: 04/2008

 **ESPEREMOS QUE FIQUE SATISFEITO COM O PRODUTO E OBTENHA BONS RESULTADOS COM PENIMASTER®!**


Para mais informações, consulte o na Internet o website: www.penis.de

Estão reservadas as alterações que sirvam propósitos técnicos. São válidas as nossas condições gerais de venda. Estado deste informação: 04/2008

MSP Concept GmbH & Co. KG
Pfalzburger Straße 80 · D-10719 Berlin

www.penis.de

Deutschland: 030 23 63 85 65
Worldwide: 0049 30 23 63 85 65

 **RESERVDELAR KOSTNADSFRI (GARANTI)**
Så får Du 36 månaders utbytesrätt på alla delar med undantag för remmar, komfortband och reservdelar med utgången garantitid (se våra garantier):

- Bedöm med hjälp av räkningsdatumet om Din PeniMaster® inte är äldre än 3 år.
- Skicka den defekta delen tillsammans med en kopia på inköpsräkningen och tillräckligt frankerad till nedanstående adress. ELLER
- Gör en väl läslig (förbättrat läslig) digital kopia av din räkning (t. ex med en scanner) och ett foto på den defekta delen, på vilket defekten syns tydligt. Skicka båda dokumenten som .jpg- och/eller .gif-filer till:
→ www.penis.de

HÅLLREMMAR, KOMFORTBAND OCH RESERVDELAR MED UTGÅNGEN GARANTI.

Vid beställning av reservdelar till utrustning utan garantianspråk, hållremmar eller komfortband, Vänligen använd följande Internetadress: www.penis.de/reservdelar

 **BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ DÍLY (ZÁRUKA)**

Takto obdržíte 36 měsíců bezplatnou náhradu na všechny díly s výjimkou třmenových držáků, komfortních pásků a náhradních dílů s prošlou zárukou (viz naše VOP):

- Zkontrolujte na základě data účtenky, zda Váš PeniMaster® není starší než 3 roky.
- Zašlete defektní díl společně s kopií dokladu o koupi správně ofrankovanou zásilkou na niže uvedenou adresu. НЕВО
- Vytvořte dobře čitelnou digitální kopii Vašeho účtu (např. skenerem) a fotografii defektního dílu, na které je zřetelně rozez natelná závada. Zašlete oba dokumenty jako soubory .jpg a/nebo gif na:
→ www.penis.de

TŘMENOVÉ DRŽÁKY, KOMFORTNÍ PÁSKY A NÁHRADNÍ DÍLY S PROŠLOU ZÁRUKOU

Prosíme, použijte pro objednávání náhradních dílů pro přístroje bez nároku na záruku, třmenové držáky nebo komfortní pásky následující internetovou adresu: www.penis.de/nahradni-dily

 **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАРАНТИЯ)**

Таким образом, Вы получаете 36 месяцев на бесплатную замену всех деталей за исключением удерживающих ремней, поясков комфорта и запасных деталей с истекшим сроком гарантии


(смотри наши Общие условия заключения торговых сделок):

- С помощью даты выписки счета проверьте, не прошло ли со времени покупки Вашего аппарата ПениМастер® более трех лет.
- Пошлите с оплаченным почтовым сбором дефектную деталь вместе с копией фактуры покупки по нижеуказанному адресу. ИЛИ
- Выполните четкую (лучше разборчивую) цифровую копию Вашего счета (например, с помощью сканирующего устройства) и фотографию дефектной детали, на которой можно отчетливо распознать дефект. Пошлите оба документа в форме файлов .jpg и/или .gif по адресу: → www.penis.de

УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ, ПОЯСКИ КОМФОРТА И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГАРАНТИИ

Пожалуйста, для того чтобы заказать запасные детали для аппаратов без права на гарантийный ремонт, удерживающие ремни или пояски комфорта, используйте следующий адрес в Интернете: www.penis.de/spare-parts-russian

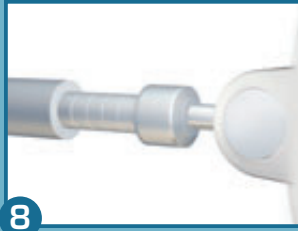

**a****b****c****d****1****2****3****4****5****6****7****8**

SIZE PENIMASTER® İLE MUTLULUK VE BAŞARI DILIYORUZ!

Daha detaylı bilgileri internette www.penis.de adresinde bulabilirsiniz.

Teknik geliştirme nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Firmamızın Genel Şirket Şartnamesi geçerlidir. Bu bilgilerin güncelliği: 04/2008



DU ØNSKES MEGET GLÆDE OG SUCCES MED DIN PENIMASTER®!

Yderligere informationer står på vor hjemmeside www.penis.de

Ændringer, der tjener tekniske forbedringer, forbeholdes. Vore almindelige forretningsbetingelser (AGB) er gældende. Stand af denne information: 04/2008



WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCES MET UW PENIMASTER®!

Verdere informatie vindt u op het internet op www.penis.de

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Datum van deze informatie: 04/2008



VI ÖNSKAR DIG MYCKET GLÄDJE OCH FRAMGÅNG MED DIN PENIMASTER®!

Ytterligare information finner du på Internet under www.penis.de

Vi reserverar oss för sådana ändringar uppkomna genom den tekniska utvecklingen. Det gäller våra garantier. Denna information finns på: 04/2008



PŘEJEME VÁM MNOHO RADOSTI A ÚSPĚCHU S VAŠÍM PENIMASTER®!

Další informace najdete na internetu na stránce www.penis.de

Změny, sloužící technickému pokroku, vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Stav této informace: 04/2008



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ МНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И УСПЕХА С ВАШИМ АППАРАТОМ ПЕНИМАСТЕР®!

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интернете в www.penis.de

Оставлено за собой право на изменения, способствующие техническому прогрессу. Имеют силу наши Общие условия заключения торговых сделок (AGB). Состояние этой информации на: 04/2008

KOSTENLOSE ERSATZTEILE (GARANTIE)

So erhalten Sie 36 Monate kostenlosen Ersatz auf alle Teile mit Ausnahme der Halteriemens, Komfortbänder und Ersatzteile mit abgelaufener Garantie (s. unsere AGBs):

- Prüfen Sie anhand des Rechnungsdatums, ob Ihr PeniMaster® nicht älter als 3 Jahre ist.
- Senden Sie das defekte Teil zusammen mit einer Kopie der Kaufrechnung ausreichend frankiert an unten stehende Adresse. ODER
- Machen Sie eine gut leserliche digitale Kopie Ihrer Rechnung (z.B. mit einem Scanner) und ein Foto des defekten Teils, auf dem der Defekt deutlich zu erkennen ist. Senden Sie beide Dokumente als .jpg- und/oder .gif-Dateien an: → www.penis.de

HALTERIEMEN, KOMFORTBÄNDER UND ERSATZTEILE MIT ABGELAUFENER GARANTIE

Bitte nutzen Sie zur Bestellung von Ersatzteilen für Geräte ohne Garantieanspruch, Halteriemens oder Komfortbändern folgende Internetadresse: www.penis.de/ersatzteile

REPLACEMENT PARTS FREE OF CHARGE (WARRANTY)

We will provide replacements for all parts for 36 months, except for the fastening belt, comfort bands and spare parts with expired warranty (see our general terms and conditions).

- Check the date on the receipt to make sure your PeniMaster® is no older than 3 years.
- Send the defect part, with sufficient postage, together with a copy of the receipt to the address given below. OR
- Make a clearly legible digital copy of your receipt (e.g. with a scanner) and a photograph of the defect part in which the defect is clearly recognizable. Send both documents as .jpg and/or .gif files to: → www.penis.de

FASTENING BELTS, COMFORT BANDS AND REPLACEMENT PARTS WITH EXPIRED WARRANTY

Please use the following internet address to order replacement parts for devices without warranty, fastening belts or comfort bands: www.penis.de/spare-parts

PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES (GARANTIE)

Vous recevez gratuitement pendant 36 mois toutes les pièces de rechange, à l'exception des courroies de maintien, bandes de confort et pièces de rechange dont la garantie a expiré (cf. nos CGV).

- Vérifier au moyen de la date d'émission de la facture si votre PeniMaster® n'a pas été acheté il y a plus de 3 ans.
- Envoyer la pièce défectueuse assortie d'une copie de la facture de vente à l'adresse située ci-dessous (veillez à affranchir suffisamment le pli).
- Faites une copie numérique bien lisible de votre facture (par ex. avec un scanner) ainsi qu'une photo de la pièce défectueuse sur laquelle le défaut apparaît clairement. Envoyez les deux documents au format .jpg ou .gif à l'adresse suivante : → www.penis.de

COURROIES DE MAINTIEN, BANDES DE CONFORT ET PIÈCES DE RECHANGE DONT LA GARANTIE A EXPIRÉ

Pour commander les pièces de rechange d'appareils dont la garantie a expiré, les courroies de maintien ou bandes de confort, veuillez utiliser l'adresse Internet suivante : www.penis.de/pièces-de-rechange

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (GARANZIA)

In questo modo riceverà ogni 36 mesi gratuitamente pezzi di ricambio per tutti i componenti dell'apparecchio ad eccezione di cinghie di tenuta, fasce confort e pezzi di ricambio per i quali sia scaduta la garanzia (si vedano le nostre condizioni generali di affari).

- Verifichi, controllando la data della fattura, che il Suo PeniMaster® non abbia più di tre anni.
- Inviare le parti difettose con una fotocopia della ricevuta d'acquisto in busta affrancata con l'importo corretto all'indirizzo di seguito riportato. OPPURE
- Faccia una copia digitale ben leggibile della ricevuta (ad esempio con uno scanner) ed una foto della parte difettosa, dalla quale sia ben riconoscibile il difetto. Inviare entrambi i documenti in forma di file .jpg- e/o .gif a: → www.penis.de

CINGHIE DI TENUTA, FASCE CONFORT E PARTI DI RICAMBIO PER LE QUALI SIA SCADUTA LA GARANZIA.

Per ordinare parti di ricambio per apparecchi non in garanzia, cinghie di tenuta o fasce confort utilizzare il seguente indirizzo internet: www.penis.de/pezzi-di-ricambio

PIEZAS DE RECAMBIO GRATUITAS (GARANTÍA)

Así obtendrá piezas de recambio de todas las piezas gratuitamente durante 36 meses, a excepción de las correas de sujeción, las cintas de confort y las piezas de recambio con garantía vencida (ver nuestras CGC):

- Verificar según la fecha de la factura de compra, si su PeniMaster® no tiene más de 3 años.
- Enviar la pieza defectuosa junto con una copia de la factura de compra con porte de correo pagado a la dirección mencionada a continuación: BIEN
- Hacer una copia digital bien legible de su factura (p.ej. con un escáner) y de la foto de la pieza defectuosa donde se vea bien el defecto. Enviar ambos documentos como archivos .jpg y/o .gif a: → www.penis.de

CORREAS DE SUJECIÓN, CINTAS DE CONFORT Y PIEZAS DE RECAMBIO CON GARANTÍA VENCIDA

Para pedir las piezas de recambio para aparatos sin derecho a garantía, correas de sujeción o cintas de confort, utilizar la dirección en Internet siguiente: www.penis.de/piezas-de-repuesto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITAS (GARANTIA)

Assim, obtém 36 meses de substituição de peças, com exceção dos cintos de retenção, da fita de conforto e de peças de substituição com garantia limitada (ver as nossas condições gerais de venda):

- verifique, de acordo com a data da factura, se o seu PeniMaster® não tem mais do que 3 anos.
- envie as peças com defeito juntamente com uma cópia da factura de compra suficientemente franqueada para a morada abaixo referida. OU
- faça uma cópia digital bem legível (que se consiga ler melhor) da sua factura (por ex. com um scanner) e junte uma foto da peça com defeito, na qual se consiga detectar de forma evidente o defeito na peça. Envie os dois documentos como ficheiros .jpg e/ou .gif: → www.penis.de

CINTOS DE RETENÇÃO, FITA DE CONFORTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA LIMITADA

Para encomendar peças de substituição para aparelhos não abrangidos pela garantia, cintos de conforto ou fitas de conforto, utilize o seguinte endereço da Internet: www.penis.de/peças-de-substituicao



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Kauf von PeniMaster®. Sie haben damit das einzige bekannte Prinzip gewählt, um Ihren Penis ohne risikoreiche Operation schmerzfrei und dauerhaft positiv zu verändern. Wenn Sie PeniMaster® gemäß dieser Gebrauchsanweisung anwenden, wird Ihr Penis im schlaffen als auch im erigierten Zustand länger und dicker werden. Zudem eignet sich PeniMaster® zur Korrektur unerwünschter Peniskrümmungen und wahlweise auch zur Verlängerung der Vorhaut (z.B. für beschnittene Anwender).

Die verbesserte Durchblutung und das Training der Penismuskulatur steigern in vielen Fällen das Lustempfinden, die Erektionsfähigkeit und die sexuelle Ausdauer. Viele Anwender besiegen durch die Erfolge mit PeniMaster® langjährige Komplexe, die sie an einem freien, unbefangenen Sexualleben gehindert haben. Auch die Suche nach einem Partner fällt oft mit dem Bewusstsein leichter, in körperlicher Hinsicht „gut dazustehen“.

Sie können PeniMaster® problemlos selbst ohne Hilfe Dritter (z.B. einem Arzt) anwenden. PeniMaster® erzielt bei beschnittenen als auch unbeschnittenen Anwendern gleich gute Erfolge. PeniMaster® ist ein professionelles Gerät und für jedes Alter geeignet. Dennoch empfehlen wir den Einsatz erst mit Vollendung der Volljährigkeit, damit der Penis vor der Behandlung seine natürliche Länge erreicht hat.

FUNKTIONSPRINZIP

Das Funktionsprinzip von PeniMaster® ist einfach: Durch dauerhafte Zugeinwirkung über einen längeren Zeitraum hinweg wird das Zellgewebe des Penis zum Wachstum angeregt: Es entstehen neue Körperzellen, der Penis wird länger und dicker. Unregelmäßige Gewebeverteilungen im Penis – die Ursache für Peniskrümmungen – werden durch neues Gewebe ausgeglichen: Der Penis wird gerader. Mit PeniMaster® kann die Vorhaut stärker als der restliche Penis gestreckt werden. Somit ist bei Bedarf auch eine Vorhautverlängerung möglich (siehe Anleitung).

Hinweis: Obwohl der Penis während der Streckung dünner aussieht, wird er nach der Behandlung wieder seinen ursprünglichen Umfang haben oder dicker sein!

Das Prinzip des Wachstums durch Dehnung macht sich die Medizin beispielsweise auch in der Orthopädie oder in der Hautchirurgie zunutze, wo ebenfalls spezielle Streckgeräte zum Einsatz kommen.

Die Möglichkeit, den Penis durch dauerhafte Streckung zu verlängern, wird übrigens seit Jahrhunderten genutzt: Die Karamojong (Eingeborene in Nord-Uganda) oder die Sadhus (Indien) erreichen durch Anbringen von Gewichten am Penis beeindruckende Resultate (vgl. Encyclopaedia Britannica; Stern Nr. 49/95).

BENUTZUNG VON PENIMASTER®

ANWENDUNG

Der Erfolg von PeniMaster® hängt zum einen von der auf den Penis ausgeübten Zugkraft, zum anderen von der Dauer der Anwendung ab. Nur eine gute Balance zwischen Zugkraft und Tragedauer gewährleistet optimale Ergebnisse!

[!] Grundsätzlich sollten Sie das Tragen von PeniMaster® immer als angenehm, keinesfalls jedoch als schmerzhaft empfinden! Schmerzen sind ein sicheres Zeichen für eine Fehlanwendung, etwa durch zu stark eingestellte Zug- oder Haltekräfte!

VORBEREITUNGEN ZUM ANLEGEN

- Ziehen Sie die Auflagefläche von den Haltestangen.
- Ziehen Sie den Halteriemern aus den Schlitzen der Auflagefläche.
WICHTIG: Drücken Sie hierbei beide Arretierflügel auf der Unterseite der Halteauflage herunter. Andernfalls kann der Halteriemern beschädigt werden. Dies gilt auch für das Ablegen nach der Anwendung oder wenn die Fixierkraft auf den Penis durch Lockern des Halteriemerns schwächer eingestellt werden soll!
- Schrauben Sie die Feinjustierschrauben auf kleinste Höhe (so dass kein Schraubgewinde mehr zu sehen ist).
- Stellen Sie die richtige Gesamtlänge des Gerätes (entspricht ungefähr der Länge Ihres steifen Penis plus 1,5 cm) durch Entfernen, Austauschen oder Ineinanderschrauben der mitgelieferten Verlängerungsstangen ein. Die Stangen haben eine Länge von 2, 4, 6 und 8 cm und können jeweils ineinander geschraubt werden. Dieses ergibt folgende mögliche Ausbaulängen: 10 cm (Stangen 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
[!] Die sechs Ministangen (bei Lieferung zu zwei Stangen von je 1,5 cm zusammengeschaubt) dienen zur Feineinstellung von +0,5, +1,0 oder +1,5 cm.

ANLEGEN VON PENIMASTER®


- Dehnen Sie den Penis von Hand etwa eine Minute. Führen Sie den schlaffen Penis durch das Ansatzstück.
- FIXIER-VARIANTE I** – Vorhaut stärker verlängern: Um die Vorhaut stärker bzw. überproportional zum Penis wachsen zu lassen (z.B. um bei einem beschnittenen Penis Vorhaut zurückzugewinnen), legen Sie das Komfortband über die verbliebene (Vor-)Haut, ggf. auch mit etwas Abstand zur Eichel, um den Penis. Auf diese Weise wird die Haut intensiver gestreckt und stärker zum Wachsen angeregt.
FIXIER-VARIANTE II – Vorhaut proportional zum Penis verlängern: Um die Vorhaut nur so viel wie den Penis wachsen zu lassen, ziehen Sie die Vorhaut zurück und legen das Komfortband direkt hinter die Eichel um den Penis. Auf diese Weise wird die Haut schwächer gestreckt und weniger als in Fixier-Variante I zum Wachsen angeregt.
- Legen Sie den Halteriemern über das Komfortband, so dass die anatomisch geformte Krümmung im Halteriemern (zwischen den beiden „Ohren“) zur Eichel zeigt. *Sofern angenehm, kann das Komfortband mehrfach um den Penis gewickelt, ansonsten entsprechend gekürzt oder auch weggelassen werden.*
- Stecken Sie die beiden Enden des Halteriemerns wieder in die Schlitz der Auflagefläche. Um das Einklemmen von Haut in den Schlitzen der Auflagefläche zu vermeiden, legen Sie nun bitte einen Finger zwischen Penis und Auflagefläche. Ziehen Sie die Enden des Halteriemerns fest an und anschließend den Finger heraus.
- Der Penis ist nun auf der Halteauflage fixiert. [!] *Vermeiden Sie es, den Penis übermäßig zu quetschen!* Sollten der Penis oder die Eichel sich verfärben, lösen Sie bitte umgehend den Halteriemern und fördern Sie die Blutzirkulation durch Massage. Beobachten Sie insbesondere in der Eingewöhnungsphase der ersten Tage, ob Sie negative Veränderungen im Aussehen oder in der Funktion des Penis bemerken und pausieren Sie, bis die Symptome abgeklungen sind.
- Drücken Sie die Auflagefläche mit dem eingespannten Penis auf das Ende der Verlängerungsstangen.
- Sie können das Gerät mit gleich gutem Ergebnis wahlweise nach oben oder unten tragen.
- Regulieren Sie die Zugkraft von PeniMaster® durch Heraus-schrauben der Schraubgewinde (siehe auch nächster Punkt „Einstellen der Zugkraft“).

EINSTELLEN DER ZUGKRAFT

Am Ende der Haltestangen befinden sich jeweils **5 EINGEKERBTE MARKIERUNGEN IN DEN METALLSTANGEN**.

Diese zeigen nach dem Prinzip einer Federwaage an, wie stark die ausgeübte Zugkraft auf den Penis ist:

MARKIERUNG

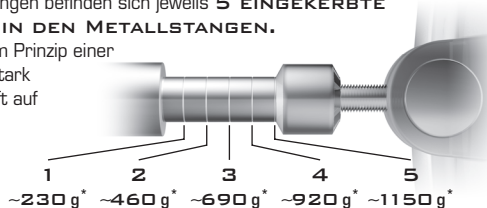

1 ~230 g* 2 ~460 g* 3 ~690 g* 4 ~920 g* 5 ~1150 g*

Beispiel für das Ablesen der Federwaage: Federt das Gerät z.B. nach dem Anlegen so weit ein, dass Sie nur noch 3 der 5 Markierungen sehen können, beträgt die eingestellte Zugkraft zwischen 460 g und 690 g. Können Sie nur noch die letzte Markierung sehen, beträgt die Zugkraft zwischen 920 g und 1150 g.

Um die Dehnung auf den Penis zu erhöhen, drehen Sie bitte beide Einstellschrauben gleichmäßig gegen den Uhrzeigersinn. Hierdurch wird die Gesamtlänge des Gerätes vergrößert. Um die Zugkraft schwächer einzustellen, drehen Sie die Einstellschrauben in die andere Richtung (im Uhrzeigersinn).

Hinweis: Das Schraubgewinde darf erst herausgeschraubt werden, wenn der Penis durch Auswahl der richtigen Stangenlänge (s.o.) bereits leicht gedehnt wird. Ansonsten kann keine oder nur ungenügend Zugkraft aufgebaut werden! Stellen Sie die Zugkraft zu Beginn der Behandlung nur schwach ein (z.B. zwischen 0 g und 230 g), um sich an das Gerät zu gewöhnen. Dies kann bis zu zwei Wochen dauern. Sie trainieren Ihren Penis optimal, wenn Sie immer die höchstmögliche Zugkraft einstellen, mit der Sie das Gerät ohne Probleme 60 bis 90 Minuten tragen können.

Hinweis: Sollte sich der Penis einige Zeit nach dem Anlegen nachdehnen und die Zugkraft hierdurch schwächer werden, regulieren Sie die Zugkraft bitte nach! Steigern Sie die Zugkraft langsam über Wochen, bis Sie möglichst nur noch eine Markierung an der Federwaage sehen. Bei auftretenden Schmerzen stellen Sie PeniMaster® bitte schwächer ein!

ÜBERMÄSSIGE ODER SCHMERZHAFTE HALTE- UND ZUGKRÄFTE KÖNNEN SICH NEGATIV AUF DAS ZELLWACHSTUM AUSWIRKEN!

[!] Belastungen über 1150 g sollten Sie aus Sicherheitsgründen auch dann nicht einstellen, wenn Sie das Gefühl haben, damit keine Probleme zu haben.

TRAGEDAUER

Sie sollten PeniMaster® täglich mindestens 3 Stunden anlegen. Längere Tragezeiten verbessern das Ergebnis! Nach jeweils 60 bis 90 Minuten machen Sie bitte eine Pause von etwa 15 Minuten und massieren den Penis, um die Durchblutung anzuregen. Diese kurzen Pausen fördern den Wachstumsprozess!

Sie können PeniMaster® – nach ausreichender Eingewöhnungszeit – täglich beliebig lange unter weiter Kleidung tragen (bitte denken Sie an die Pausen alle 60 bis 90 Minuten!). Tragezeiten von 6 oder mehr Stunden pro Tag führen zu optimalen Wachstumsergebnissen. Grundsätzlich gibt es keine zeitliche Begrenzung, wieviele Monate Sie PeniMaster® maximal anwenden können. Im Gegenteil: Je länger Sie PeniMaster® tragen, desto deutlicher wird das Resultat. Das Minimum für einen sichtbaren Erfolg liegt bei einer Tragezeit von etwa 3 Stunden täglich über einen Zeitraum von einem Monat. Ergebnisse, die während der ersten vier Wochen erzielt werden, können zum Teil auf Gewebedehnung basieren und sind gegebenenfalls nicht dauerhaft. Da während des Schlafens keine Tragepausen gemacht werden können, wird die Anwendung hierbei nicht empfohlen und sollte nur erwogen werden, wenn ansonsten keine ausreichenden Tragezeiten erreicht werden können. Vor der Anwendung im Schlaf muss der Benutzer hinreichend Erfahrung mit den für ihn richtigen Einstellungen für eine mehrstündige Anwendung im Wachzustand gesammelt haben.

Sorgen Sie sich nicht um Ihr gutes Resultat, wenn Sie PeniMaster® mehrere Tage oder über einen längeren Zeitraum nicht tragen können, etwa, weil Sie auf Reisen sind: Das bis dahin erreichte Wachstum bleibt erhalten und setzt sich fort, wenn Sie die Anwendung wieder aufnehmen. Und bedenken Sie bitte, dass die Behandlung Ihren Penis wachsen lässt – dies benötigt naturgemäß Zeit! Seien Sie zuversichtlich und verlieren Sie nicht die Geduld, wenn Sie nach wenigen Tagen noch kein Ergebnis sehen: Sie werden mit einem „Penis nach Maß“ für Ihren Durchhaltewillen belohnt!

HYGIENEHINWEISE

Damit Sie lange Freude an Ihrem PeniMaster® haben, reinigen Sie Ihren Penis und PeniMaster® bitte vor und nach jeder Anwendung mit lauwarmem Wasser und Seife. Trocknen Sie den Penis und das Gerät anschließend gut ab. Dies dient der allgemeinen Hygiene, beugt Entzündungen vor und erleichtert außerdem die Fixierung des Penis durch den Halteriemens. Dieser rutscht durch Körperfette, Puder oder fetthaltige Pflegeprodukte schneller vom Penis ab.

Das Gerät ist rostfrei und wird durch Wasser keinen Schaden nehmen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Bleibende Nebenwirkungen durch die Anwendung von PeniMaster® sind nicht bekannt. Während der Anwendung sind leichte Hautrötungen im Bereich des Halteriemens aufgrund mechanischer Beanspruchung normal. Diese sind nicht schmerzhaft und klingen nach dem Ablegen von PeniMaster® schnell wieder ab.

Nach einer Anwendung von PeniMaster® kann es vorteilhaft sein, den Penis mit einer Feuchtigkeitslotion einzucremen, um die Haut zu entspannen.

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

PENIMASTER® DARF NICHT ANGEWENDET WERDEN

- unter Alkoholeinfluss
- unter Drogeneinfluss
- unter dem Einfluss beruhigender Mittel
- unter dem Einfluss von Schlafmitteln oder Mitteln, die das Schmerzempfinden herabsetzen
- bei bekannter Chromallergie und bei Unverträglichkeit von Polycarbonat (PC) und TPE
- bei bekannten Problemen mit dem Penis, den Hoden oder der Harnröhre
- bei Venen- oder Bindegewebsschwäche
- bei bestehenden oder auftretenden Schmerzen im Penis oder den Hoden
- bei Penisimplantaten

Treten während der Anwendung von PeniMaster® plötzlich Schmerzen, farbliche Veränderungen oder sonstige äußerliche Irritationen oder funktionale Veränderungen des Penis, der Eichel oder der Hoden auf, ist die Behandlung umgehend auszusetzen und erst nach dem Abklingen fortzuführen. Sollten die Symptome nach dem Aussetzen der Behandlung anhalten oder sich verschlechtern, ist vorsichtshalber ein Arzt (z.B. Urologe) aufzusuchen. Sollten Sie aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder einer bekannten Krankheit nicht sicher sein, ob die Anwendung von PeniMaster® für Sie geeignet ist, fragen Sie bitte vor der Selbstanwendung Ihren Arzt (Urologen).

CONGRATULATIONS!

Dear customer!

Thank you for purchasing PeniMaster®. You have selected the only recognised principle for permanently enlarging the penis painlessly and without risky operation. If you follow these instructions on how to use PeniMaster®, your penis will become longer and thicker both when flaccid and erect. PeniMaster® is also suitable for correcting unwanted curvature of the penis and may even be used to extend the foreskin (e.g. for circumcised users).

Improved blood flow and training the muscles of the penis in many cases leads to increased pleasure, longer-lasting erections and greater sexual stamina. The success they have had with PeniMaster® has helped many users overcome the complexities that have prevented them from enjoying a free and natural sex life for many years. Finding a partner also often comes easier knowing that you physically "stand out".

You can easily use PeniMaster® alone without needing help from a third party (e.g. a physician). PeniMaster® produces the same good results whether the user is circumcised or not. PeniMaster® is a professional device and is suitable for all ages. However, we only recommend its use for adults in order to ensure that the penis has reached its natural length before beginning treatment.

HOW IT WORKS

The principle of PeniMaster® is simple: Continuous traction applied over an extended period of time stimulates the cell tissue in the penis to grow: New cells are created, making the penis longer and thicker. Irregular distribution of tissue in the penis – the cause of bending in the penis – is balanced out with new tissue: The penis becomes straighter. With PeniMaster® the foreskin can be stretched more than the rest of the penis. This means that an elongation of the foreskin is also possible if desired (see instructions).

Note: Although the penis appears thinner during stretching, it will return again to its original thickness or will be thicker after use!

Modern medicine also uses this principle of growth by traction in orthopaedics and skin surgery, for example, where special traction equipment is also employed.

The idea of lengthening the penis by permanent traction is certainly nothing new. The Karamojong in northern Uganda and the Sadhus in India achieve impressive penis lengths by attaching weights to their penises (see Encyclopaedia Britannica; Stern No. 49/95).

USING PENIMASTER®

APPLICATION

The success of PeniMaster® depends on both the traction exerted on the penis and the duration of use. Only a good balance between traction and duration of use will guarantee the best results.

[!] *Generally speaking, wearing PeniMaster® should always be a pleasant experience and should not cause any pain at all! Pain is a definite indication of incorrect use, caused, for example, by setting the strength of traction too high or fastening too tightly!*

PREPARATION FOR PUTTING ON PENIMASTER®

- Pull the supporting surface away from the supporting rods.
 - Pull the fastening belt out of the slits in the supporting surface.

IMPORTANT: Push both locking wings down onto the underside of the bearing surface. If this is not done, the fastening belt may be damaged. This also applies to removal after use or if the hold on the penis needs to be loosened using the fastening belt.
 - Screw the fine adjusting screws to the lowest level (until the thread can no longer be seen).
 - Select the correct total length of the device (corresponds approximately to the length of your erect penis plus 1.5 cm). Remove, connect or replace the extension rods supplied to achieve the basic length of the device to fit you. The extension rods are 2, 4, 6 and 8 cm long and can be connected to each other. This provides the following extension lengths: 10 cm (extension rods 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
- [!] *The six mini-rods (supplied as sets of two rods, each 1.5 cm long and screwed together) are used for fine adjustments of +0.5, +1.0 or +1.5 cm.*

PUTTING ON PENIMASTER®

- Elongate the penis by hand for about one minute. Guide the penis while flaccid through the attachment.
- FASTENING METHOD I** – For more pronounced elongation of the foreskin: To elongate the foreskin more noticeably or more in relation to the penis, (e.g. to regain foreskin on a circumcised penis), place the comfort band on the penis over the foreskin, if necessary at a sufficient distance from the gland. This will stretch the skin more intensely and thus stimulate its growth more strongly.


FASTENING METHOD II – For less pronounced elongation of the foreskin in proportion to the penis: To make the foreskin grow less pronouncedly or in proportion to the penis, pull back the foreskin and place the comfort band on the penis directly behind the gland. This will stretch the skin less and will provide less stimulation of growth than in FASTENING METHOD I.
- Place the fastening belt over the comfort band so that the anatomically formed curvature of the fastening belt (between the two "ears") points towards the gland. *The comfort band can be wrapped around the penis as many times as is comfortable, otherwise it can be shortened to an appropriate length or can even be left out completely.*
- Push both ends of the fastening belt back through the slits in the supporting surface. Put a finger between the penis and the supporting surface to avoid pinching skin in the slits. Tighten the ends of the fastening belt firmly and then remove your finger.
- Your penis is now fastened to the supporting surface

[!] *Avoid excessive pressure on the penis!* Should the penis or gland change colour, immediately loosen the fastening belt and massage the penis to re-activate the blood circulation. During the first few days of use, take particular note of any negative changes in the appearance or functioning of the penis and discontinue use until the symptoms have abated.
- Push the supporting surface that holds the penis to the end of the rods.
- You have the option of wearing the device either upwards or downwards, achieving the same good results either way.
- Adjust the traction of PeniMaster® by loosening the screw thread (see also next point "adjusting the traction").

ADJUSTING THE TRACTION

There are **5 NOTCHES ON THE END OF EACH METAL ROD.**

Following the principle of spring balance, they indicate the strength of traction applied to the penis.

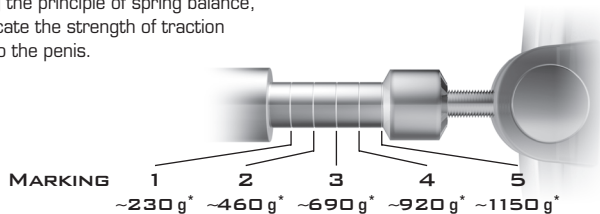

This is an example of how to read the spring balance: Once you are wearing the device, if it extends until only 3 of the 5 markings are still visible, the traction is set between 460 and 690 grams. If only the last marking is still visible, the traction is between 920 and 1150 grams. Only use a weak traction to begin with to get used to the device (e.g. between 0 and 230 g).

To increase the traction on the penis, twist both adjustment screws evenly in an anti-clockwise direction. This will increase the overall length of the device. To decrease the traction of the penis, turn the adjustment screws in the other direction (clockwise).

Note: The screw thread can only be unscrewed when the penis is slightly stretched by selecting the correct rod length (see above). Otherwise no traction, or an insufficient amount of traction, will be created! Select a low level of traction when beginning treatment (e.g. between 0 and 230 g) in order to get used to the device. This can take up to two weeks. You will best train your penis if you always select the highest possible traction with which you can wear the device for 60–90 minutes without any problems.

Note: Should the penis stretch further some time after application, therefore resulting in weaker traction, please readjust the traction accordingly! Increase the traction slowly over the course of a few weeks until only one marking remains visible on the spring balance if possible. If you start to feel any pain, please set PeniMaster® at a lower traction!

EXCESSIVE OR PAINFUL FASTENING OR TRACTION CAN HAVE A NEGATIVE EFFECT ON CELL GROWTH.

[!] For your safety, you should not set the device to loads over 1150 grams, even if you feel this would not cause you any discomfort.

HOW LONG TO WEAR PENIMASTER®

PeniMaster® should be worn for at least three hours daily. Wearing it for longer periods improves the results! Every 60 to 90 minutes, take a 15 minute break and massage the penis to activate the blood circulation. These short breaks support the growing process!

After a sufficient period of getting used to PeniMaster®, you can wear it under loose clothing (please remember to take breaks every 60 to 90 minutes!).

Wearing it for 6 or more hours per day leads to optimal growth results.

In principle, there is no maximum number of months you can use PeniMaster®. On the other hand, the longer you wear PeniMaster®, the more noticeable the result. The minimum wearing time for visible success is around 3 hours a day for a period of one month. Results which are achieved in the first four weeks can be due to tissue expansion and may not be permanent.

Since no break can be taken from wearing the PeniMaster® during sleep, use whilst sleeping is not recommended and should only be considered if a sufficiently effective period of time cannot be achieved otherwise. Before using it while sleeping, the user must have a sufficient amount of experience with the settings that are right for him for use over several hours whilst awake.

Do not worry about missing out on good results if you sometimes cannot wear PeniMaster® for a few days or even over a longer period, for example while on holiday. Growth that has already been achieved is retained and continues once you resume treatment. Please remember that the method helps your penis to grow – and, naturally, this takes time! Take an optimistic view and do not lose patience if you do not see any results after just a few days. A larger penis will be your reward for your perseverance!

HYGIENE ADVICE

In order to enjoy your PeniMaster® for a long time, Please clean penis and PeniMaster® before and after each use with lukewarm water and soap. Dry the penis and device thoroughly. This serves general hygiene, prevents infection and also makes it easier to fasten the penis with the fastening belt. This is more likely to slip off if there is any body grease, powder or oil-based care product present.

The device is rust-free and is not damaged by contact with water.

PRECAUTIONS FOR USE AND WARNINGS

Use of PeniMaster® is not known to produce any remaining side-effects. Slight reddening of the skin in the area of the supporting belt is normal during use due to mechanical load. This is not painful and the reddening quickly disappears when PeniMaster® is taken off.

After using PeniMaster®, it is recommended to rub moisturising lotion onto the penis to relax the skin.

Please observe the following precautions and warnings:

PENIMASTER® SHOULD NOT BE USED

- under the influence of alcohol
- under the influence of narcotics
- under the influence of sedatives
- under the influence of sleeping drugs or drugs that lower awareness of pain
- in the case of a known chrome allergy or intolerance of polycarbonate (PC) and TPE
- in the case of known problems with the penis, the testicles or the urethra
- in the case of weakness of the veins or connective tissue
- in the case of existing pain or the onset of pain in the penis or testicles
- together with penis implants

Should pain, changes in colour or other kinds of external irritation or functional changes of the penis, gland or testicles suddenly occur while using PeniMaster®, stop the treatment immediately and do not continue until symptoms have abated. Should the symptoms continue or worsen after discontinuation of treatment, consult a physician or urologist as a matter of precaution. If, owing to physical limitations or a known disease, you are not sure whether use of PeniMaster® is suitable for you, please consult your physician or urologist before using it.

FÉLICITATIONS !

Cher client !

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de PeniMaster®. Grâce à PeniMaster®, vous avez choisi le seul principe vérifiable et efficace pour un rallongement durable du pénis et ce, sans aucune opération chirurgicale. Si vous utilisez PeniMaster® en vous conformant au mode d'emploi, votre pénis gagnera en longueur et en largeur, tant au repos qu'en érection. PeniMaster® est également adapté pour corriger les déformations indésirables du pénis et pour rallonger le prépuce des hommes circoncis par exemple.

En outre, l'amélioration de l'irrigation sanguine et la stimulation des muscles du pénis augmentent dans de nombreux cas le plaisir, la capacité d'érection et l'endurance sexuelle. Grâce aux succès obtenus par PeniMaster®, de nombreux utilisateurs ont pu se débarrasser des complexes dont ils souffraient depuis des années et qui les privaient d'une vie sexuelle libre et naturelle. La recherche d'un partenaire est souvent facilitée par le sentiment d'être physiquement «à la hauteur».

Vous pouvez utiliser vous-même PeniMaster® sans problème et sans l'intervention d'une tierce personne (par exemple du médecin). PeniMaster® permet d'obtenir de bons résultats, que l'utilisateur soit circoncis ou pas. PeniMaster® est un appareil professionnel, adapté pour tous les âges. Nous ne recommandons cependant l'utilisation de PeniMaster® qu'une fois la majorité atteinte pour s'assurer que le pénis ait atteint sa longueur naturelle avant traitement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le principe de PeniMaster® est simple : l'effet de traction durable exercé pendant une longue durée stimule la croissance du tissu cellulaire pénien : de nouvelles cellules corporelles apparaissent et le pénis gagne en longueur et en largeur. La distribution irrégulière du tissu pénien, causant une courbure du pénis, est compensée par la formation d'un nouveau tissu, ce qui permet d'obtenir un pénis plus droit. PeniMaster® permet d'étirer le prépuce plus fortement que le reste du pénis. Une extension du prépuce est ainsi également possible en cas de besoin (voir mode d'emploi).

Remarque : Bien que le pénis ait l'air plus mince lors de l'extension, il recouvre sa circonférence initiale après le traitement ou devient plus gros !

La médecine fait également appel au principe de croissance par étirement, ce qui est par exemple le cas en orthopédie ou en chirurgie dermatologique où des appareils d'étirement spéciaux sont utilisés.

L'idée de rallonger le pénis en l'étirant n'est au demeurant pas nouvelle : la population du Karamoja (population du nord de l'Ouganda) ou les Sadhus (en Inde) obtiennent, en portant des poids au pénis, des longueurs impressionnantes (cf. Encyclopédie Britannica; Stern No 49/95).

UTILISATION DE PENIMASTER®

L'efficacité de PeniMaster® dépend d'une part de la force de traction exercée sur le pénis, et, d'autre part, de la durée d'utilisation. Seul un bon équilibre entre traction et durée du port de l'appareil assure un résultat optimal !

[!] *Le port de PeniMaster® doit toujours être ressenti comme agréable, et en aucun cas douloureux! Les douleurs sont le signe certain d'une mauvaise utilisation, par exemple un réglage de traction ou de maintien trop fort !*

PRÉPARATION POUR METTRE EN PLACE PENIMASTER®


- Tirez les surfaces d'appui des tiges de maintien.
- Tirez la courroie de maintien hors des fentes des surfaces d'appui.
IMPORTANT : Pour cela, abaissez les deux ailettes d'arrêt situées sur la face inférieure du support de maintien. Autrement, la courroie de maintien peut être endommagée. Procédez de la même manière lorsque vous enlevez l'appareil après utilisation ou lorsque la force de fixation sur le pénis doit être réglée plus faible en relâchant la courroie de maintien.
- Serrez les vis d'ajustage fin à la hauteur minimale (de sorte que le filet de vis disparaisse complètement).
- Ajustez l'appareil à la bonne longueur (cette longueur correspond approximativement à la longueur de maintien pénis en érection plus 1,5 cm). Pour ce faire, retirez, échangez ou vissez les rallonges métalliques fournies. Les tiges de rallonge ont une longueur de 2, 4, 6 ou 8 cm et peuvent être combinées les unes avec les autres. Il en résulte les possibilités de longueurs de montage suivantes : 10 cm (tiges 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6). [!] *Les six petites tiges de rallonge (tiges de chacune 1,5 cm vissées par deux lors de la livraison) permettent un réglage précis de +0,5, +1,0 ou +1,5 cm.*

MISE EN PLACE DE PENIMASTER®

- Allongez votre pénis durant environ une minute. Placez le pénis au repos dans l'embout.
- VARIANTE DE FIXATION 1** – Rallongement important du prépuce : de manière à faire croître fortement le prépuce (ce qui permet d'atteindre une longueur supérieure au pénis et de recréer ainsi le prépuce excisé lors de la circoncision), placez la bande de confort sur le prépuce restant ou enroulez-la autour du pénis, tout en laissant un certain espacement par rapport au gland. Ceci entraîne un étirement de la peau plus intense et une meilleure stimulation de la croissance.
VARIANTE DE FIXATION 2 – Allongement du prépuce proportionnellement au pénis : De manière à agrandir le prépuce proportionnellement au pénis, tirez-le vers l'arrière, avant d'enrouler la bande de confort juste derrière le gland. Ceci entraîne un étirement de la peau et une stimulation de la croissance plus faibles que pour la variante de fixation 1.
- Posez la courroie de maintien sur la bande de confort afin que la courbure ergonomique de la courroie de maintien soit orientée vers le gland (entre les deux « oreilles »). *Si cela vous convient, vous pouvez enrouler plusieurs fois la bande autour du pénis, ou alors la raccourcir en conséquence ou l'enlever.*
- Enfoncez de nouveau les deux extrémités de la courroie de maintien dans les ouvertures de la base de fixation. Pour éviter de coincer la peau dans les ouvertures, posez un doigt entre le pénis et la surface d'appui, puis tirez les deux extrémités de la courroie de maintien vers le bas et retirez votre doigt.
- Votre pénis est maintenant bien monté sur la base de fixation. [!] *Évitez une compression excessive du pénis !* Si lors de l'utilisation de PeniMaster®, un changement de couleur de votre pénis ou de votre gland devait apparaître, le courroie de maintien et réactivez la circulation sanguine en massant ces parties. Surveillez particulièrement pendant la phase d'adaptation des premiers jours l'apparition éventuelle de changements d'aspect ou de fonctionnement du pénis et le cas échéant, suspendez l'utilisation jusqu'à ce que les problèmes se soient dissipés.
- Appuyez la surface d'appui, avec pénis étendu, sur l'extrémité des tiges.
- Vous pouvez au choix porter en le plaçant l'appareil vers le haut ou vers le bas, sans que cela n'influe sur le résultat.
- Réglez la force de traction de PeniMaster® en dévissant le filet de vis (cf. également le point suivant « réglage de la force de traction »)

RÉGLAGE DE LA FORCE DE TRACTION

5 ENCOCHES DE REPÈRE GRAVÉES se trouvent à chaque extrémité des tiges métalliques. Elles indiquent, suivant le principe d'un peson à ressort, l'intensité de la force de traction exercée sur le pénis.

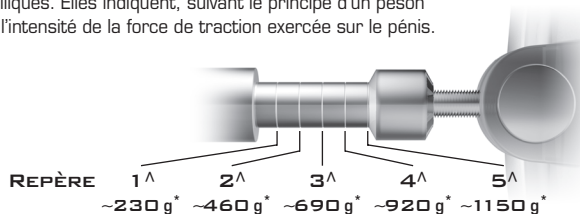

Exemple de lecture du peson à ressort:

Si, après sa mise en place, l'appareil se rabat au point que seuls 3 des 5 repères soient visibles, la force de traction est réglée entre 460 et 690 grammes. Si vous ne voyez plus que le dernier repère, elle est réglée entre 920 et 1150 grammes. Afin d'augmenter la traction du pénis, tournez les deux vis de réglage de façon régulière contre le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, la longueur totale de l'appareil est augmentée. Pour régler la force de traction plus faible, tournez les vis dans l'autre sens (dans le sens des aiguilles d'une montre).

Remarque : La monture à vis ne peut être dévissée que lorsque le pénis est déjà légèrement étiré, après avoir sélectionné la bonne longueur de tiges (voir ci-dessus). Dans le cas contraire, la force de traction s'avèrera inexistante ou insuffisante ! Au début du traitement, choisissez une force de traction faible (entre 0 et 230 grammes) de manière à vous habituez au port de l'appareil. Cela peut durer jusqu'à deux semaines. Votre pénis est entraîné de manière optimale lorsque vous réglez la force de traction la plus élevée possible, force pour laquelle l'appareil peut être porté 60-90 minutes sans problème.

Remarque : Après un certain temps, si le pénis continue à s'allonger après la pose de l'appareil et si la force de traction s'en trouve affaiblie, veuillez ajuster la force de traction ! Augmentez la force de traction lentement sur plusieurs semaines, et ce jusqu'à ce que seul un repère sur le peson à ressort ne soit encore visible. En cas de douleurs, veuillez réduire la force de traction de PeniMaster®!

LA CROISSANCE DES CELLULES N'EST PAS FAVORISÉE PAR L'EMPLOI DE LA FORCE OU UNE AUGMENTATION EXAGÉRÉE DE LA FORCE DE TRACTION !

[!] Par souci de sécurité, vous ne devez pas régler les charges supérieures à 1150 g même si vous pensez que cela ne vous causerait pas de problèmes !

DURÉE DE PORT

Au cours des deux premières semaines, le temps d'utilisation doit s'élever à au moins 3 heures par jour. Une durée de port plus longue améliore les résultats ! Veuillez faire une pause de 15 min toutes les 60 à 90 minutes. Massez alors le pénis, pour stimuler la circulation sanguine. Ces courtes pauses favorisent le processus de croissance !

Après un temps d'adaptation suffisant, vous pouvez porter PeniMaster® tous les jours sous vos vêtements (pensez cependant aux pauses toutes les 60 à 90 minutes). Une croissance optimale est obtenue par un port de 6 heures par jour ou plus. Fondamentalement, il n'existe aucune limite de temps au port de PeniMaster®. Au contraire : Plus vous portez le PeniMaster®, plus les résultats sont convaincants. Vous devez porter l'appareil au minimum trois heures par jour, et ce sur une durée d'un mois afin d'obtenir un résultat visible. Les résultats des quatre premières semaines peuvent baser en partie sur une extension du tissu et il est possible qu'ils ne soient pas durables.

Le port de nuit n'est pas conseillé, dans la mesure où les pauses ne peuvent être effectuées durant le sommeil et ne peut être envisagé que si vous ne pouvez atteindre une durée de port suffisante. Avant de procéder à une utilisation durant le sommeil, l'utilisateur doit avoir acquis une expérience suffisante concernant les réglages adaptés à une utilisation de plusieurs heures en état de veille. Ne craignez pas de nuire aux bons résultats lorsque vous ne pouvez pas porter PeniMaster® exceptionnellement plusieurs jours ou plus longtemps, par exemple du fait d'un voyage : la croissance atteinte jusqu'à cette interruption demeure et se poursuivra à la reprise du traitement.

Et n'oubliez pas que la méthode dont il s'agit est de stimuler la croissance du pénis, un processus qui, par nature, prend du temps ! Soyez donc confiants et ne perdez pas patience si vous ne constatez pas de progrès au bout de quelques jours : votre persévérance sera récompensée par un « pénis sur mesure ».

CONSEILS D'HYGIÈNE

Pour plus de plaisir lors de l'utilisation de votre PeniMaster®, veuillez nettoyer votre pénis et PeniMaster® avant et après chaque utilisation à l'eau tiède et au savon. Séchez ensuite soigneusement pénis et appareil. Cette précaution garantit une bonne hygiène, prévient les infections et facilite en outre la fixation du pénis par la courroie de maintien. En effet, celle-ci glisse du pénis quand elle est posée sur un support contenant de la graisse, de la poudre ou encore des produits de soin gras.

L'appareil est antirouille et ne risque pas d'être dégradé par l'eau.

MESURES DE PRÉCAUTION POUR L'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation de PeniMaster® n'entraîne pas d'effets secondaires connus. De légères rougeurs au niveau de la courroie de maintien dues à une charge mécanique sont normales. Elles ne sont pas douloureuses et disparaissent rapidement après retrait de PeniMaster®.

Une fois PeniMaster® retiré, il peut être utile d'appliquer une crème hydratante sur le pénis pour détendre la peau.

Veuillez en outre tenir compte des mesures de précaution et recommandations suivantes :

PENIMASTER® NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ :

- sous l'influence de l'alcool
- sous l'influence de drogues
- sous l'influence de tranquillisants
- sous l'influence de somnifères ou d'analgésiques
- en cas d'allergie connue au chrome et d'intolérance au polycarbonate (PC) et TPE
- en cas de problèmes identifiés du pénis ou de l'urètre
- en cas de déficience vasculaire ou des tissus conjonctifs
- en cas d'autres affections liées au pénis ou aux testicules
- en cas de prothèse pénienne

Si lors de l'utilisation de PeniMaster®, apparaissent des douleurs, des modifications de couleur ou autres irritations extérieures ou des modifications de fonctionnement du pénis, du gland ou des testicules, le traitement doit être immédiatement suspendu et ne doit être repris qu'une fois les problèmes dissipés. Si ces symptômes perdurent après la suspension du traitement, consultez par mesure de précaution un médecin (par ex. un urologue). Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser PeniMaster® du fait de restrictions physiques ou d'une maladie identifiée, veuillez consulter votre médecin (urologue) avant de l'utiliser seul.

COMPLIMENTI!

Egregio Cliente!

La ringraziamo per l'acquisto del PeniMaster®. PeniMaster® si avvale di un principio semplice, di provata efficacia, per ingrandire il pene in modo indolore e duraturo senza rischiosi interventi chirurgici. Se utilizzerà PeniMaster® come indicato in queste istruzioni per l'uso, il Suo pene diventerà più lungo e più grosso, sia in stato di riposo che in erezione. Oltre a ciò PeniMaster® è adatto alla correzione di curvature indesiderate del pene e, a scelta, anche per l'estensione del prepuzio (ad esempio in caso di circoncisione).

Inoltre la migliore circolazione sanguigna e l'allenamento della muscolatura del pene aumentano in molti casi il piacere, l'erezione e la durata sessuale. Grazie al successo ottenuto con PeniMaster®, molti utenti hanno potuto superare complessi di lunga data che li ostacolavano una vita sessuale libera e naturale. Anche la ricerca di un partner diventa spesso più facile quando si ha la coscienza di "presentarsi bene" dal punto di vista corporeo.

Può applicare PeniMaster® senza problemi da solo senza l'aiuto di terzi (ad es. un dottore). PeniMaster® ottiene gli stessi buoni risultati sia in caso di circoncisione sia in assenza di circoncisione. PeniMaster® è un apparecchio professionale ed adatto ad ogni età. Tuttavia consigliamo l'impiego del prodotto solo dopo il raggiungimento della maggiore età, in modo che il pene possa svilupparsi nella sua lunghezza naturale prima del trattamento.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il principio di funzionamento di PeniMaster® è semplice: esercitando una costante azione di trazione per un certo periodo di tempo viene stimolata la crescita del tessuto cellulare del pene. Ne risultano nuove cellule che consentono al pene di divenire più lungo e grosso. Inoltre, il nuovo tessuto cellulare va a compensare le difformità nella distribuzione del tessuto stesso, ossia ad eliminare la causa prima delle curvature del pene. Il pene diviene dunque più dritto. Grazie a PeniMaster® è possibile stirare maggiormente il prepuzio rispetto al resto dell'organo sessuale. Ciò consente pertanto, se necessario, di allungare il prepuzio (vedi istruzioni).

Indicazione: Sebbene in fase di stiramento il pene possa sembrare più sottile, in seguito al trattamento esso riacquisterà il suo volume originario o diverrà addirittura più grosso!

Il principio della crescita mediante stiramento viene ad esempio utilizzato dalla medicina in ortopedia o in chirurgia dermatologica, ambiti nei quali vengono adoperate speciali apparecchiature di stiramento.

Del resto l'idea di allungare il pene mediante uno stiramento prolungato non è affatto nuova, anzi è impiegata da secoli: i Karamojong del Nord Uganda oppure i Sadhu in India raggiungono lunghezze impressionanti mediante l'applicazione di pesi al pene (cfr. Enciclopedia Britannica; rivista "Stern" n. 49/95).

COME SI UTILIZZA PENIMASTER®

APPLICAZIONE

Il successo del trattamento con PeniMaster® dipende da un lato dalla forza di trazione esercitata sul pene, d'altro lato dalla durata dell'applicazione. Solo un buon equilibrio tra forza di trazione e durata dell'applicazione garantisce risultati ottimali! (!) *In generale nel portare PeniMaster® si dovrebbe avere una sensazione confortevole, mai dolorosa! I dolori sono un segnale sicuro di applicazione errata, ad esempio di una forza di trazione o di tenuta troppo forte!*

PREPARAZIONI ALL'APPLICAZIONE DEL PENIMASTER®


- Sfilare la superficie d'appoggio dalle aste di tenuta.
- Sfilare le cinghie di tenuta dalle fessure della superficie d'appoggio.
IMPORTANTE: Nel farlo spingere in giù le due alette di bloccaggio presenti sulla parte inferiore della superficie d'appoggio. Altrimenti la cinghia di tenuta potrebbe danneggiarsi. Questa avvertenza vale anche per riporre l'apparecchio dopo l'uso oppure quando è necessario ridurre la forza esercitata sul pene allentando le cinghie di tenuta!
- Stringere le viti di regolazione fine all'altezza minima (in modo che non siano più visibili le filettature delle viti).
- Regolare la lunghezza complessiva corretta dell'apparecchio (che corrisponde all'incirca alla lunghezza del pene in erezione più 1,5 cm) togliendo, sostituendo o evitando tra loro le aste di estensione fornite. Le aste hanno una lunghezza di 2,4,6, e 8 cm e possono essere avvitate l'una con l'altra. Le lunghezze possibili ottenibili dalla combinazione delle aste sono 10 cm (8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
(!) *Le sei ministanghe (consegnate avvitate in due stanghe da 1,5 cm ciascuna) sono fornite per l'esatta messa a punto con +0,5, +1,0 o +1,5 cm.*

APPLICAZIONE DEL PENIMASTER®

- Estendete con la mano il pene per circa un minuto. Infilate il pene non in erezione nell'apparecchio.
- FISSAGGIO-VARIANTE I** – Allungamento più intenso del prepuzio.
Per fare crescere il prepuzio maggiormente o in misura proporzionalmente superiore rispetto al pene (ad esempio per recuperare il prepuzio in caso di circoncisione) appoggiare la fascia confort intorno al pene sopra la pelle (o prepuzio) rimasta, eventualmente mantenendo una certa distanza dal glande. In questo modo la pelle viene tesa in modo più intenso e la sua crescita stimolata in modo più efficace.
FISSAGGIO-VARIANTE II – Allungamento del prepuzio proporzionalmente al pene. Per fare crescere il prepuzio solamente tanto quanto il pene, tirare indietro il prepuzio e posizionare il nastro intorno al pene direttamente dietro al glande. In tal modo la pelle viene sottoposta ad una tensione minore e la crescita stimolata in modo meno intenso rispetto alla variante di fissaggio I.
- Applicare la cinghia di tenuta sopra alla fascia confort, in modo che la curvatura anatomica della cinghia (compresa tra le due "orecchie") sia rivolta verso il glande. *Se ciò non risulta di intralcio, la fascia confort può essere avvolta più volte attorno al pene, altrimenti può essere accorciata o anche trascurata.*
- Infilare di nuovo le due estremità della cinghia di tenuta nelle fessure della superficie d'appoggio. Tenendo un dito tra pene e appoggio, tirare con forza le estremità verso il basso e quindi togliete il dito. In questo modo si evita che la pelle finisca nella fessura del supporto.
- Il Suo pene è fissato alla superficie di appoggio. (!) *Evitate di schiacciare eccessivamente il pene!* Se durante l'applicazione di PeniMaster® compaiono cambiamenti di colore del pene o del glande, interrompere immediatamente l'applicazione e stimolare la circolazione sanguigna massaggiando la parte interessata. Osservare attentamente, specialmente nella fase di ambientamento dei primi giorni, se compaiono modificazioni negative nell'aspetto o nelle funzioni del pene ed eventualmente fare una pausa ed attendere fino a che i sintomi non si siano attenuati.
- Fissare la superficie di appoggio con il pene in tensione al termine dell'uso.
- E' possibile indossare l'apparecchio verso l'alto o il basso, a piacere. I risultati saranno comunque ottimi.
- Regolare la forza di trazione del PeniMaster® svitando le viti filettate (si veda anche il punto successivo "Regolazione della forza di trazione").

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI TRAZIONE

Al termine delle aste di tenuta si trovano 5 TACCHE INCOLLATE SULLE ASTE METALLICHE. Queste indicano, come in una bilancia a molla, quanto grande è la forza di trazione esercitata sul pene:

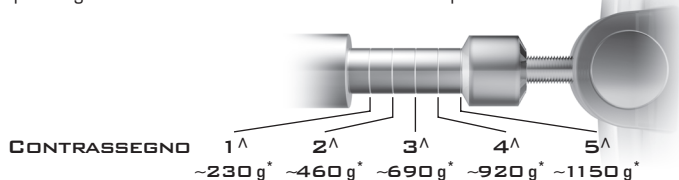

Esempio di lettura della bilancia a molla:

se l'apparecchio dopo l'applicazione dovesse molleggiare p.es. tanto che si possano vedere solo 3 delle 5 tacche, la forza di trazione è regolata tra 460 g e 690 g. Se si può vedere solo l'ultima tacca la forza di trazione è regolata tra 920 g e 1150 g.

Per aumentare lo stiramento esercitato sul pene, girare le due viti di regolazione uniformemente in senso antiorario. In tal modo, si aumenta la lunghezza complessiva del dispositivo. Per diminuire la forza di trazione, girare le viti di regolazione in senso contrario (in senso orario).

Indicazione: La vite filettata deve essere svitata solamente quando il pene sia già stato leggermente stirato grazie alla regolazione della giusta lunghezza delle aste (vd. sopra). Altrimenti non potrà generarsi alcuna forza di trazione o si genererà una forza di trazione insufficiente! All'inizio del trattamento regolare l'apparecchio in modo che la forza di trazione sia lieve (ad esempio: tra 0 e 230 g.), in modo da abituarvi all'apparecchio. Questa procedura potrebbe durare sino a due settimane. L'allenamento del pene è ottimale quando si imposta sempre la forza di trazione massima possibile, con la quale è possibile indossare l'apparecchio senza alcun problema per 60-90 minuti.

Indicazione: Se qualche tempo dopo l'applicazione il pene dovesse ritirarsi leggermente e la forza di trazione dovesse diminuire, regolarla nuovamente! Aumentare gradatamente la forza di trazione nel corso delle settimane, sino a che non sia visibile possibilmente una sola tacca sulla bilancia a molla. In caso di comparsa di dolori si prega di diminuire l'intensità di trazione di PeniMaster®!

UN USO FORZATO ED UN AUMENTO ECCESSIVO DELLA FORZA DI TRAZIONE POSSONO AVERE UN EFFETTO NEGATIVO SULLA CRESCITA CELLULARE!

[!] Per ragioni di sicurezza andrebbe evitato un carico superiore ai 1150 grammi anche se si ha la sensazione che tale peso possa essere sopportato senza problemi.

DURATA DELL'APPLICAZIONE

PeniMaster® dovrebbe essere indossato quotidianamente almeno per 3 ore. Tempi di applicazione più lunghi portano ad un migliore risultato! Ogni 60-90 minuti fare una pausa di ca. 15 min. e massaggiare il pene per stimolare la circolazione. Queste brevi pause favoriscono il processo di crescita!

Dopo un periodo di adattamento sufficientemente lungo potrà indossare PeniMaster® ogni giorno per il tempo che vorrà sotto indumenti ampi (ricordandosi di rispettare le pause ogni 60-90 minuti!) Un'applicazione di sei o più ore al giorno produce risultati di crescita ottimali. In genere non esiste un limite di durata per quanto riguarda i mesi di trattamento con PeniMaster®. Al contrario: più a lungo viene impiegato PeniMaster®, tanto più evidenti saranno i risultati. La durata minima di applicazione per il conseguimento di un risultato visibile è di tre ore giornaliere per almeno un mese. I risultati raggiunti durante le prime quattro settimane possono talvolta risultare dallo stiramento dei tessuti, e possono pertanto non essere duraturi. Poiché durante il sonno non possono essere effettuate le necessarie pause, si sconsiglia di indossare l'apparecchio durante la notte, quando non è altrimenti possibile raggiungere tempi di applicazione sufficienti.

Prima di poter utilizzare l'apparecchio durante il sonno, l'utente deve avere acquisito sufficiente esperienza delle regolazioni per lui corrette per un'applicazione di diverse ore da sveglia.

Non è necessario preoccuparsi del risultato se non le sarà possibile portare PeniMaster® per alcuni giorni o per un periodo più lungo, ad esempio in viaggio: la crescita sino ad allora ottenuta si conserva e prosegue con la ripresa del trattamento. La preghiamo di tenere presente che questo tipo di trattamento consiste nel stimolare la crescita del pene – e questo richiede naturalmente tempo! Abbia quindi fiducia e non si scoraggi se dopo alcuni giorni non noterà ancora alcun risultato: sarà ricompensato per la Sua costanza con un "pene su misura"!

IGIENE

Per poter usufruire il più a lungo possibile dei benefici di PeniMaster®, si prega di pulire il pene e PeniMaster® prima e dopo ogni applicazione con acqua tiepida e sapone. Quindi asciugare con cura il pene e l'apparecchio. Tale precauzione è da osservare per motivi igienici in generale, per prevenire le infiammazioni e facilitare il fissaggio del pene mediante la cinghia. Essa infatti si sfilia facilmente a causa di talco o sostanze oleose prodotte dal corpo o contenute in prodotti per la cura personale.

L'apparecchio è inossidabile e non subisce danni a contatto con l'acqua.

PRECAUZIONI PER IL TRATTAMENTO E AVVERTIMENTI

Non sono noti effetti collaterali causati dall'applicazione del PeniMaster®. Durante il trattamento sono da considerarsi normali leggeri arrossamenti della pelle nella zona della cinghia di tenuta, causati dalla sua azione meccanica. Questi arrossamenti non sono dolorosi e scompaiono velocemente una volta rimosso PeniMaster®.

Dopo aver rimosso PeniMaster® può essere utile applicare sul pene una lozione idratante per distenderne la pelle.

La preghiamo comunque di rispettare le seguenti misure cautelative e avvertimenti:

PENIMASTER® NON DEVE ESSERE APPLICATO

- sotto l'effetto di alcolici
- sotto l'effetto di droghe
- sotto l'effetto di tranquillanti
- sotto l'effetto di sonniferi o medicinali che abbassano la soglia di sensibilità al dolore
- in caso di allergia riconosciuta al cromo e intolleranza al policarbonato (PC) e al TPE
- in caso di problemi noti al pene, ai testicoli o alle vie urinarie
- in caso di insufficienza venosa o di debolezza dei tessuti connettivi
- in caso di dolori al o ai testicoli o che eventualmente insorgano durante il trattamento
- in caso di trapianto del pene

Se durante l'applicazione di PeniMaster® compaiono improvvisamente dolori, cambiamenti di colore o irritazioni esterne di altro tipo oppure disturbi funzionali del pene, del glande o dei testicoli, interrompete immediatamente l'applicazione e proseguite solo alla scomparsa dei sintomi. Nel caso in cui questi sintomi permangano o peggiorino dopo l'interruzione dell'applicazione è consigliabile farsi visitare per precauzione da un medico (ad es. urologo). Se a causa di limitazioni fisiche o di malattie già note non è sicuro se il trattamento con PeniMaster® sia adatto o meno a Lei, la preghiamo di rivolgervi prima dell'applicazione al suo medico (urologo) di fiducia.

¡FELICIDADES!

Estimado cliente:

Le agradecemos el haber comprado PeniMaster®. Con ello se ha decidido por el único principio conocido para agrandar su pene sin dolor y positivamente de manera duradera. Si usted utiliza PeniMaster® según las siguientes instrucciones de uso, el tamaño y la longitud de su pene aumentarán tanto en estado de reposo como en estado de erección. PeniMaster® también puede utilizarse para corregir curvaturas no deseadas del pene y según se prefiera también para alargar el prepucio (p.ej. para usuarios circuncisos).

La mejora de la circulación sanguínea y el fortalecimiento de los músculos del pene intensifican en muchos casos, además, la sensación de placer, fortalecen la capacidad de erección y alargan la durabilidad sexual. Gracias al éxito que consiguen con PeniMaster®, muchos usuarios logran superar complejos que durante muchos años les habían impedido disfrutar de una vida sexual libre y natural. Incluso buscar pareja en muchos casos es más fácil cuando se sabe que físicamente "todo está en su sitio".

PeniMaster® puede usarlo usted mismo sin problemas y sin ninguna ayuda (p.ej., de un médico). PeniMaster® tiene el mismo éxito tanto en los usuarios circuncisos como en los incircuncisos. PeniMaster® es un dispositivo profesional y es adecuado para todas las edades. Sin embargo, recomendamos utilizarlo recién después de haber cumplido la mayoría de edad, para garantizar que el pene haya alcanzado su longitud natural antes del tratamiento.

PRINCIPIO DEL FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento de PeniMaster® es sencillo: mediante el efecto permanente de tensión durante un periodo prolongado, se estimula el crecimiento del tejido celular del pene. Es decir, se crean nuevas células y el pene crece en longitud y en volumen. La distribución irregular del tejido en el pene, lo que provoca las curvaturas de éste, se compensa con nuevo tejido. El pene se vuelve más recto. Con PeniMaster® se puede estirar el prepucio con más fuerza que el resto del pene. Por ello, en caso necesario también es posible alargar el prepucio (ver instrucciones).

Advertencia: a pesar de que el pene durante el estiramiento pudiera parecer más fino, tras finalizar el tratamiento el pene volverá a tener su perímetro original o incluso éste será más grueso.

El principio de crecimiento mediante estiramiento se utiliza en la medicina. Por ejemplo, en la ortopedia y en la cirugía cutánea se aplican igualmente sistemas de estiramiento especiales.

Por otra parte, la idea de alargar el pene estirándolo de manera permanente no es nada nuevo, se hace desde hace siglos: los Karamojong del norte de Uganda o los Sadhus de la India, tras colocar pesos en el pene, logran resultados sorprendentes (véase Enciclopedia Británica; revista Stern no. 49/95).

USO DEL PENIMASTER®

APLICACIÓN

El éxito del PeniMaster® depende, por un lado, de la tensión aplicada sobre el pene y por el otro, de la duración de la aplicación. ¡Solamente un buen equilibrio entre la fuerza de tracción y el tiempo de aplicación garantiza buenos resultados! [!] ¡El uso del PeniMaster® debe producir en todo momento una sensación agradable, en ningún caso debe ser doloroso! ¡El dolor es una señal inconfundible del uso erróneo, por ejemplo, debido a un ajuste excesivo de la fuerza de tracción o de retención!

PREPARACIÓN PARA EL USO DEL PENIMASTER®


- Retirar la superficie de apoyo de las varillas de retención.
- Sacar la correa de sujeción de las ranuras de la superficie de apoyo. **IMPORTANTE: al mismo tiempo apriete hacia abajo las dos alas de sujeción situadas en la parte inferior de la superficie de contacto. De lo contrario la correa de sujeción podría resultar dañada. Esto también es aplicable en el momento de retirar el PeniMaster® después de haber sido utilizado sobre el pene una fuerza de fijación más débil mediante el aflojamiento de las correas de sujeción.**
- Ajustar los tornillos de precisión a la altura mínima (de manera no se vea ninguna rosca de los tornillos).
- Adaptar la longitud total adecuada del aparato (correspondiente aproximadamente a la longitud del pene erecto más 1,5 cm) y para ello retirar, ajustar unos a otros o reemplazar las varillas de retención enviadas. Las varillas tienen longitudes de 2, 4, 6 y 8 cm y pueden ajustarse una a otra. Esto proporciona las longitudes básicas siguientes: 10 cm (varillas 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6). [!] Las seis minivarillas (en el envío hay dos varillas atornilladas de 1,5 cm cada una) sirven para obtener un ajuste de precisión de +0,5, +1,0 o +1,5 cm.

COLOCACIÓN DEL PENIMASTER®

- Estirar el pene manualmente aproximadamente durante un minuto. Introducir el pene flácido a través del prolongador.
- VARIANTE DE FIJADO I** – Alargar mucho más el prepucio: para hacer crecer mucho más el prepucio o sobreproporcionalmente al pene (p.ej. para recuperar el prepucio del pene en el caso de los circuncisos), enrolla la cinta de confort sobre el prepucio restante, si fuera necesario, también a cierta distancia del glande. De esta manera, la piel se estira más intensamente y se estimula más su crecimiento. **VARIANTE DE FIJADO II** – Alargar el prepucio proporcionalmente al pene: para hacer crecer el prepucio únicamente tanto como el pene retire hacia atrás el prepucio y coloque la cinta de confort directamente detrás del glande alrededor del pene. De esta manera, la piel se estira menos y se estimula menos su crecimiento que en la variante de fijado I.
- Colocar la correa de soporte sobre la cinta de confort, de manera que la curvatura formada anatómicamente (entre las "orejas") mire en dirección al glande. Siempre y cuando resulte cómodo, se puede enrollar la cinta de comodidad varias veces alrededor del pene, si no se puede acortar como sea necesario o no colocarla.
- Introducir ambos extremos de la correa de sujeción de nuevo en la ranura de la superficie de apoyo. Para evitar que se enganche la piel en las ranuras de la superficie de apoyo, poner un dedo entre el pene y la superficie de apoyo. Tirar bien de los extremos de la correa de sujeción y luego retirar el dedo.
- Ahora queda el pene sujeto sobre la superficie de apoyo. [!] ¡Evitar que el pene esté excesivamente comprimido! Si durante la aplicación del PeniMaster® notara alteraciones del color del pene o del glande, soltar inmediatamente la correa de sujeción y estimular la circulación de la sangre con masajes. Observar particularmente en la etapa de adaptación de los primeros días si se notan cambios negativos en el aspecto o en el funcionamiento del pene y, dado el caso, hacer una pausa hasta que hayan desaparecido los síntomas.
- Presionar la superficie de apoyo con el pene sujeto contra el extremo de las varillas.
- Puede llevar el aparato y obtener el mismo buen resultado bien hacia arriba o hacia abajo.
- Regular la fuerza tractora aflojando los tornillos. (Ver también el punto siguiente "Ajuste de la fuerza tractora").

AJUSTE DE LA FUERZA TRACTORA

Al final de cada una de las varillas de retención se encuentran 5 MARCAS GRABADAS EN LAS VARILLAS METÁLICAS. Éstas indican según el mismo principio que una balanza de resorte, el nivel de la fuerza de tracción que actúa sobre el pene:

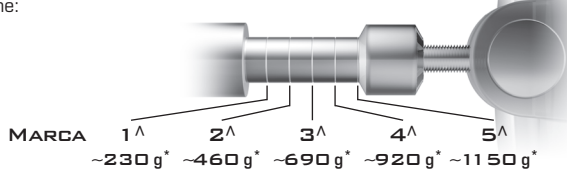

Ejemplo para leer la balanza de resorte:

Si una vez colocado el aparato, éste se mantiene en una posición en la que se ven, por ejemplo, solamente 3 de las 5 marcas, la fuerza de tracción ajustada es de entre 460 y 690 gramos. Si queda visible solamente la última marca, la fuerza de tracción es de entre 920 y 1150 gramos.

Para incrementar el estiramiento sobre el pene, gire ambos tornillos de fijación de manera uniforme en dirección contraria a las agujas del reloj. De esta manera se aumentará la longitud total del aparato. Para disminuir la fuerza de tracción, gire los tornillos de fijación en la dirección contraria (en el sentido de las agujas del reloj).

Advertencia: no se deben desatornillar los tornillos hasta que el pene, mediante la selección de la longitud de las varillas (ver más arriba), no se haya estirado ligeramente. De lo contrario no se originará ninguna fuerza de tensión o ésta no será suficiente. Al inicio del tratamiento, coloque la fuerza de tracción solamente débil (p.ej. entre 0 y 230 gramos), para que se acostumbre al aparato. Esto puede durar hasta dos semanas. Si configura siempre la máxima fuerza de tensión posible de tal manera que pueda llevar el aparato de 60 a 90 minutos sin ningún tipo de problemas, acostumbrará a su pene de manera óptima.

Advertencia: si después de algún tiempo tras la aplicación se estirara el pene y la fuerza de tracción se volviera más débil, debería ajustar adecuadamente la fuerza de tracción. Aumentar la fuerza de tracción durante el transcurso de las semanas, hasta que quede visible solamente la última marca en la balanza de resorte. ¡En caso de presentarse dolores, volver a ajustar menos el PeniMaster®!

¡UN AUMENTO DEMASIADO AGRESIVO Y AMBICIOSO DE LA FUERZA DE TRACCIÓN NO TENDRÁ NINGÚN EFECTO POSITIVO PARA EL CRECIMIENTO CELULAR!

[!] Por razones de seguridad no debería ajustar cargas superiores a 1150 g, incluso aunque tenga la sensación de no tener molestias por ello.

DURACIÓN DEL USO

PeniMaster® debe utilizarse por lo menos tres horas diarias. ¡La duración del uso más prolongado mejorará el resultado! Después de cada 60 a 90 minutos, hacer una pausa de 15 minutos aprox. y masajear el pene para estimular la circulación sanguínea. ¡Estas pequeñas pausas favorecen el proceso de crecimiento!

Después de un tiempo suficiente para acostumbrarse, se puede utilizar PeniMaster® diariamente cuanto se desee cuando lleve ropa ancha. (¡Pensar en los descansos cada 60 a 90 minutos!) Los periodos de uso de 6 o más horas al día logran óptimos resultados de crecimiento. En principio no hay limitación en cuanto al período de uso del PeniMaster®. Por el contrario, cuanto más tiempo se use PeniMaster®, más evidente será el resultado. No obstante para obtener un resultado visible deberá usarse al menos tres horas al día, durante un periodo mínimo de un mes. Los resultados que se obtengan durante las cuatro primeras semanas se pueden basar en parte a un estiramiento del tejido y si ese fuera el caso no son duraderos.

No se recomienda su uso mientras se duerme ya que no puede hacerse ningún descanso y sólo deberá considerarse esta opción si no se pueden lograr las horas de uso necesarias. Antes de que el usuario lo utilice mientras duerme deberá haber adquirido durante el día la experiencia suficiente acerca de los ajustes adecuados para una utilización de varias horas.

No se preocupe por el éxito del tratamiento si en alguna ocasión no pudiera llevar PeniMaster® durante unos días o incluso por un periodo de tiempo más largo, por ejemplo, cuando está usted de viaje: el crecimiento logrado hasta ese momento se mantendrá y continuará al volver a empezar el tratamiento. ¡Y tenga en cuenta que con este método se trata de provocar el crecimiento del pene – que naturalmente necesita tiempo! Por ello, tenga siempre confianza y no pierda la paciencia si al cabo de algunos días aún no se notan los resultados: ¡Su perseverancia será premiada con un “pene a la medida”!

INDICACIONES HIGIÉNICAS

Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su PeniMaster®, limpie el PeniMaster® y su pene antes y después de cada aplicación con agua tibia y jabón. Luego secar bien el pene y el dispositivo. Esta medida sirve para efectos higiénicos generales, previene irritaciones y facilita, además, la fijación del pene con la correa de sujeción. Ésta resbala más rápidamente del pene debido a las grasas del cuerpo, al talco o a los productos cosméticos que contienen grasas.

El aparato es inoxidable y no se deteriora con el agua.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

La aplicación del PeniMaster® no provoca efectos secundarios. Durante el uso es normal que se produzcan irritaciones cutáneas leves en la zona donde se usa la correa de sujeción debido a la presión mecánica. Dichas irritaciones no provocan dolores y desaparecen rápidamente después de retirar el PeniMaster®.

Después del uso del PeniMaster® sería favorable aplicar al pene una loción hidratante para relajar la piel.

Sin embargo, le rogamos que observe las advertencias y medidas de precaución siguientes:

NO SE PUEDE USAR PENIMASTER®

- bajo la influencia de alcohol
- bajo la influencia de drogas
- bajo la influencia de calmantes
- bajo la influencia de somníferos o de medicamentos que disminuyen la sensación de dolor
- en caso de alergia al cromo y en caso de intolerancia al policarbonato (PC) y al TPE
- en caso de problemas conocidos con el pene, los testículos o la uretra
- en caso de insuficiencia venosa o de insuficiencia del tejido conjuntivo
- en caso de dolores presentes u ocasionales en el pene o en los testículos
- en caso de implantes en el pene.

Si durante la aplicación del PeniMaster®, notara repentinamente dolores, alteraciones del color u otras irritaciones externas, así como alteraciones funcionales del pene, del glándulo o de los testículos, deberá suspenderse el tratamiento inmediatamente y sólo deberá proseguirse cuando desaparezcan tales síntomas. Si estos síntomas persisten después de suspender el tratamiento o si se agravan, se debe consultar a un médico (p.ej. al urólogo) como medida de precaución. Si por razones de impedimentos físicos o por una enfermedad manifiesta no está seguro de la conveniencia del PeniMaster®, es recomendable que consulte a su médico o urólogo antes de empezar la autoaplicación.

PARABÉNS!

Caro cliente!

Agradecemos a sua compra do nosso produto PeniMaster®. Escolheu a melhor forma de modificar de forma duradoura e positiva o seu pênis, sem correr o risco de uma operação. Se utilizar o PeniMaster® de acordo com este manual de instruções, o seu pênis irá ficar mais comprido e mais grosso, tanto quando estiver flácido como quando estiver erecto. Além disso, o PeniMaster® está também adequado para a correcção de curvaturas e ainda para o aumento do prepúcio (por ex. para utilizadores circuncidado).

Uma melhor circulação do sangue e um exercício dos músculos do pênis aumentam, em muitos casos, a sensação de desejo, a capacidade de erecção e a resistência sexual. Muitos utilizadores eliminam complexos de longa data, ao obterem bons resultados com o PeniMaster®, que tinham evitado numa vida sexual livre e descomplexada. A procura de um parceiro torna-se também mais fácil quando se sente "bem consigo mesmo".

Irá conseguir utilizar o PeniMaster® sem qualquer problema e sem a ajuda de terceiros (por ex. de um médico). Tanto nos utilizadores circuncidados como nos não-circuncidados, o PeniMaster® demonstra o mesmo tipo de bons resultados. O PeniMaster® é um aparelho profissional que está adequado a todas as idades. De qualquer forma, recomendamos a utilização apenas quando for atingida a maioridade, para que o pênis atina o seu tamanho normal, antes da utilização.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento de princípio do PeniMaster® é simples: através de um efeito de tracção durante um período de tempo prolongado, o tecido celular do pênis é estimulado, fazendo-o aumentar de tamanho: são criadas novas células, tornando o pênis maior e mais grosso. Uma distribuição irregular de tecido no pênis – a causa para as curvaturas no pênis – é equilibrada através de novo tecido: o pênis fica mais direito. Com o PeniMaster® pode fazer com que o prepúcio fique mais forte do que o resto do pênis. Caso seja necessário, é também possível um aumento do prepúcio (ver instruções).

Nota: embora o pênis pareça mais fino ao esticar, depois do tratamento voltará ao seu perímetro original ou ficará mais grosso!

O princípio de crescimento por meio de extensão é também usado em Medicina, por exemplo, em ortopedia ou nas cirurgias à pele, onde também são utilizados aparelhos de extensão.

A possibilidade de aumentar o pênis através da extensão prolongada é algo já utilizado há alguns séculos: os Karamojong (povo originário do norte do Uganda) ou os Sadhus (da Índia) alcançavam resultados fantásticos, colocando pesos no pênis (cf. Enciclopédia Britânica; Stern n° 49/95).

UTILIZAÇÃO DO PENIMASTER® APLICAÇÃO

O sucesso do PeniMaster® depende da força de tracção exercida no pênis e da duração da utilização. Os bons resultados são apenas garantidos através de uma boa sintonia entre força de tracção e duração da utilização!

[!] *Acima de tudo, a utilização do PeniMaster® deverá ser sempre confortável e nunca provocar dor! Se sentir dores significa que não está a utilizar correctamente o aparelho, exercendo demasiada força de tracção ou de retenção!*

PREPARAÇÃO PARA COLOCAR O APARELHO

- a) Retire a superfície de suporte das barras de suporte.
- b) Retire os cintos de retenção da ranhuras da superfície de suporte.
IMPORTANTE: neste altura, pressione para baixo as abas de fixação, para a parte de baixo da superfície de apoio. Caso contrário, os cintos de retenção podem ser danificados. Isto também é válido ao retirar, após a utilização ou quando a força de fixação exercida no pênis está regulada para mais fraca, ao soltar o cinto de retenção.
- c) Aperte os parafusos de fixação numa altura pequena (para que não se veja nenhuma rosca de parafuso).
- d) Ajuste o comprimento total correcto do aparelho (que deve corresponder sensivelmente ao comprimento do seu pênis erecto mais 1,5 cm), afastando, substituindo ou aparafusando umas nas outras as barras extensoras fornecidas. As barras têm um comprimento de 2, 4, 6 e 8 cm e podem ser aparafusadas umas às outras. Isto resulta nos seguintes comprimentos de desenvolvimento possíveis: 10 cm (barras 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).


[!] *As seis mini barras (aparafusadas a duas barras de 1,5 cm cada no fornecimento) servem para um ajuste de precisão de +0,5, +1,0 ou +1,5 cm.*

COLOCAÇÃO DO PENIMASTER®

- 1) Estique o pênis com a mão, durante aproximadamente um minuto. Introduza o pênis flácido na peça de aplicação.
- 2) **VARIANTE DE FIXAÇÃO I** – provocar uma grande extensão do prepúcio: para fazer com que o prepúcio tenha um crescimento acentuado ou proporcionalmente superior ao pênis (por ex. para voltar a criar prepúcio, no caso de um pênis circuncidado), aplique a fita de conforto em torno do pênis, no prepúcio ou pele existente, se necessário, com alguma distância relativamente à glândula. Deste modo, a pele é puxada de forma mais intensiva e estimulada a crescer de forma mais rápida.
VARIANTE DE FIXAÇÃO II – provocar uma extensão do prepúcio proporcional ao pênis: para provocar um crescimento do prepúcio apenas proporcional ao pênis, puxe o prepúcio para trás e aplique a fita de conforto directamente atrás da glândula, em torno do pênis. Deste modo, a pele é puxada de forma mais fraca e menos estimulada a crescer do que na variante de fixação I.
- 3) Coloque os cintos de retenção em torno da fita de conforto, de modo a que a curvatura formada anatomicamente no cinto de retenção (entre ambas as "orelhas") fique a apontar para a glândula. *Se for confortável, a fita de conforto pode ser enrolada em torno do pênis várias vezes, caso contrário, pode ser encurtada de forma correspondente ou pode não ser aplicada.*
- 4) Insira ambas as extremidades do cinto de retenção novamente nas ranhuras da superfície de suporte. Para evitar entalar a pele nas ranhuras da superfície de suporte, coloque um dedo entre o pênis e a superfície de suporte. Puxe bem as extremidades do cinto de retenção e, a seguir, retire o dedo.
- 5) O pênis está agora fixo na superfície de suporte. [!] *Evite apertar demasiado o pênis!* Se o pênis ou a glândula mudarem de cor, solte imediatamente o cinto de suporte e active a circulação sanguínea através de uma massagem. Observe, especialmente na fase de adaptação dos primeiros dias, se nota alterações negativas no aspecto ou funcionamento do pênis e faça uma pausa de utilização, até os sintomas terem desaparecido.
- 6) Prima a superfície de suporte com o pênis esticado até à extremidade das barras.
- 7) Pode utilizar o aparelho facultativamente para cima ou para baixo, com o mesmos bons resultados.
- 8) Regule a força de tracção do PeniMaster®, desaparafusando a rosca do parafuso (ver também o próximo ponto "Ajustar a força de tracção").

AJUSTAR A FORÇA DE TRACÇÃO

Na extremidade das barras de suporte encontram-se **5 MARCAS GRAVADAS NAS BARRAS DE METAL**. Estas indicam, segundo o princípio de uma balança de tensão, o nível de intensidade da força de tracção e o nível de exercida no pênis:

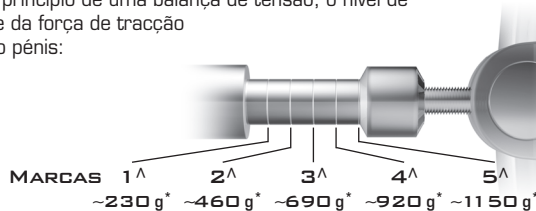

Exemplo de como ler a balança de tensão: caso o aparelho se estenda demasiado, por exemplo, após a colocação, sendo que fica apenas a ver 3 das 5 marcas, a força de tracção definida está entre as 460 g e as 690 g. Caso consiga ver apenas a última marca, é porque a força de tracção está entre as 920 g e as 1150 g.

Para aumentar a extensão no pênis, rode os dois parafusos de regulação da mesma forma no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Assim é aumentado o comprimento total do aparelho. Para regular para mais fraca a força de tracção, rode os parafusos de regulação no sentido contrário (no sentido dos ponteiros do relógio).

Nota: a rosca do parafuso só pode ser desaparafusada se o pênis tiver sido um pouco esticado, através da selecção correcta do comprimento das barras (ver acima). Caso contrário, não poderá ser aplicada ou poderá apenas ser aplicada pouca força de tracção! No início do tratamento, configure a força de tracção para uma intensidade fraca (por ex. entre 0 g e 230 g), para se habituar ao aparelho. Esta situação pode durar duas semanas. Irá perceber que está a exercitar o seu pênis da melhor forma quando regular a força de tracção para a intensidade mais elevada, sem que o aparelho trabalhe durante 60-90, que exista qualquer problema.

Nota: caso o pênis estique mais algum tempo depois da colocação, estando com uma força de tracção mais baixa, volte a ajustar a força de tracção! Aumente lentamente a força de tracção ao longo das semanas, até que possivelmente fique visível apenas uma marca na mola de tensão". Em caso de dor, diminua a força de tracção do PeniMaster®!

FORÇAS DE RETENÇÃO E DE TRACÇÃO EXCESSIVAS E QUE ORIGINEM DOR PODEM TER EFEITOS NEGATIVOS NO CRESCIMENTO DAS CÉLULAS!

[!] Por motivos de segurança, não deverá colocar cargas acima das 1150 g, mesmo pensando que não irá decorrer qualquer problema dessa acção.

DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Deve usar o PeniMaster® diariamente, durante pelo menos 3 horas. Uma maior duração de utilização tem melhores resultados! Após respectivamente 60 a 90 minutos, faça uma pausa de cerca de 15 minutos e massage o pênis para activar a circulação sanguínea. Estas pausas breves promovem o processo de crescimento!

Pode usar o PeniMaster® – depois de um período de adaptação suficiente – diariamente, durante o tempo que quiser e com qualquer tipo de vestuário (por favor não se esqueça de fazer pausas a cada 60 a 90 minutos!). Uma utilização com a duração de 6 horas ou mais tem os resultados de crescimento ideais. Basicamente não existe qualquer limite do número máximo de meses que pretende utiliza o PeniMaster®. Pelo contrário: quanto mais tempo usar o PeniMaster®, melhor será o resultado. O período de utilização mínimo para um sucesso visível é de aproximadamente 3 horas por dia durante um mês.

Os resultados atingidos durante as primeiras quatro semanas podem basear-se parcialmente na extensão dos tecidos e não são eventualmente duradouros. Uma vez que, durante o sono, não é possível fazer pausas de utilização, a utilização não é recomendada e só deve ser considerada quando, de outra forma, não se consegue atingir um tempo de utilização suficiente. Antes da utilização durante o sono, o utilizador tem de ter reunido experiência suficiente com os ajustes apropriados para si, relativamente a uma utilização de várias horas no processo de crescimento.

Não se preocupe com o facto de conseguir um bom resultado, se não puder usar o PeniMaster® durante vários dias ou durante um longo período de tempo, porque se encontra em viagem: o crescimento atingido até ao momento mantém-se e prossegue assim que retoma a utilização. E tenha em conta que o tratamento faz com que o seu pênis cresça – para isto é necessário um tempo natural! Seja confiante e não perca a sua paciência, se após alguns dias ainda não notar resultados: será recompensado com um "pênis à medida" pela sua perseverança!

INDICAÇÕES DE HIGIENE

Para que tire partido do seu PeniMaster® durante muito tempo, lave o seu pênis e o PeniMaster® antes e após cada utilização, com água morna e sabão. A seguir, seque bem o pênis e o aparelho. Isto tem como finalidade uma higiene geral, evita infecções e facilita ainda a fixação do pênis através dos cintos de retenção. Este escorrega mais rápido do pênis, devido às gorduras corporais, pó ou produtos de tratamento gordurosos.

O aparelho é inoxidável e não sofre qualquer alteração provocada pelo contacto com água.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO E INDICAÇÕES DE AVISO

São desconhecidos efeitos secundários duradouros causados pela utilização do PeniMaster®. Durante a utilização é possível que apareçam ligeiras vermelhões na pele, na zona da conta de retenção, devido ao esforço mecânico. Estes não provocam dores e voltam a desaparecer rapidamente após a remoção do PeniMaster®.

Após a utilização do PeniMaster® pode ser benéfico aplicar uma loção hidratante no pênis, para relaxar a pele. Tenha em atenção as seguintes medidas de precaução e indicações de aviso:

O PENIMASTER® NÃO PODE SER USADO

- sob o efeito do álcool
- sob o efeito de drogas
- sob o efeito de ansiolíticos
- sob o efeito de medicamentos soníferos ou analgésicos que reduzem a sensibilidade à dor
- se se sofrer de uma alergia ao metal e em caso de incompatibilidade com policarbonatos (PC) e TPE
- no caso de existirem problemas de saúde no pênis, nos testículos ou uretra
- no caso de enfraquecimento dos vasos sanguíneos ou do tecido conjuntivo do pênis
- em caso de persistência ou surgimento de dores no pênis ou nos testículos
- em caso de implantes no pênis

Se, durante a utilização do PeniMaster® surgirem dores, alterações da cor ou outro tipo de irritações ou alterações funcionais do pênis, da glândula ou dos testículos, deve interromper-se imediatamente o tratamento e retomá-lo apenas após o desaparecimento dos sintomas.

Se os sintomas persistirem ou se intensificarem após a interrupção da utilização, deve consultar um médico (por ex. um urologista) como medida de precaução. Se, devido a limitações corporais ou a uma doença conhecida, não tiver a certeza se pode utilizar o PeniMaster®, consulte o seu médico (urologista), antes de iniciar uma utilização.

TEBRİK EDERİZ!

Sayın Müşterimiz!

PeniMaster`in® satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu alet başansı ispat edilebilir ameliyatsız, ağrısız ve basit bir prensibe dayanan bir metotla erkeğin penisini kalıcı olarak büyütür. PeniMaster`is® bu kullanım kılavuzunda açıklanan talimatlar doğrultusunda uyguladığınızda, penisiniz normal ve de sertleşmiş durumda daha uzun ve daha kalın olacaktır. Ayrıca PeniMaster® istenilmeyen penis eğriliiklerini düzeltmek ve isteğe bağlı olarak sünnet derisini uzatmak (örneğin sünnetli erkeklerde) için de uygundur.

Birçok durumda kan dolaşımının düzeltilmesi ve penis kaslarında yapılan çalıştırma dolayısıyla ayrıca zevk duyguları, sertleşme yeteneği ve cinsel dayanıklılık arttırılmaktadır. PeniMaster`is® kullanımlardan birçoğu uzun yıllardan beri iç rahatlığıyla ve huzurlu bir cinsel yaşamı engelleyen komplekslerini yenmiş durumdadır. Bedensel olarak "iyi bir durumda" olmanın bilinciyle de bir eş aramak daha kolay olmaktadır.

PeniMaster`is® başkalarının yardımı olmadan (örneğin bir doktor) rahatlıkla kullanabilirsiniz. PeniMaster® sünnetli ve de sünnetsiz erkeklerde aynı kapsamda başarı sağlamaktadır. PeniMaster® her yaşta kullanılabilen profesyonel bir tıbbi alettir. Buna rağmen penisin doğal uzunluğuna erişmesinin sağlanması için PeniMaster® aletini kullanmaya ancak erginlik çağı tamamlandıktan sonra başlanması tavsiye edilir.

FONKSİYON PRENSİBİ

PeniMaster`in® prensibi çok basittir: Uzunca bir zaman süresi çerçevesinde sürekli olarak çekilmekten etkilenecek penisin hücre dokusunun gelişme yeteneği uyandırılmaktadır. Bu sayede yeni vücut hücreleri oluşur, sonuç olarak penis uzar ve kalınlaşır. Penis eğriliğine yol açan düzensiz doku dağılımları bu alet ile dengelenir. Penis düzleştirilir. PeniMaster® ile sünnet derisi, penisin geri kalan kısmına oranla daha fazla uzatılır. Böylece sünnet derisinin uzatılması istendiğinde bu alet ile sünnet derisinin uzatılması da mümkündür (Kullanım Kılavuzuna bakınız).

Uyarı: Uygulama esnasında penis ince görünse de tedaviye son verildikten sonra penis başlangıçtaki çevre ölçüsüne sahip olur veya daha kalınlaşır.

Bu büyüme prensibinden modern tıbda, da örneğin ortopedi veya cild şirürjisi de yararlanarak özel uzatma ve germe aletleri aletleri olarak kullanılmaktadır.

Penisi sürekli çekerek uzatma düşüncesi yüzyıllardan beri uygulanan bir metottur. Kuzey Uganda'da yaşayan yerli kabile Karamojong ve Hindistan'da yaşayan Sadhular yılları aşan bir süre zarfında penise ağırlık takmaları yöntemiyle müthiş penis boylarına erişmekteydiler (bkz. Britanica Ansiklopedisi; Stern Nr. 49/95).

PENIMASTER`İN® KULLANIMI

KULLANIM

PeniMaster`in® başarı sağlaması bir yandan penis üzerine uygulanan çekim gücüne ve diğer yandan da kullanım süresine bağlıdır. Sadece çekim gücü ve kullanım süresi arasında bulunan denge optimal sonuçlar sağlamaktadır!!
(!) *PeniMaster`i® taşıırken kendinizi genelde daima rahat hissetmeniz, ama kesinlikle acı duymamanız gerekir! Acı duymanız, örneğin çok güçlü ayarlanmış çekme veya tutma güçleri ayar sonucunda, yanlış kullanılmasına ilişkin bir işarettir!*

PENIMASTER`İ® YERLEŞTİRME HAZIRLIKLARI


- Yerleştirilecek yüzeyi tutma demirlerinden çekiniz.
- Tutma kayı,ını yerle, tirme yüzeyinin oyuklarından çekiniz.
ÖNEMLİ: Burada tutma yüzeyinin alt tarafındaki her iki sabitleme kelebeğini aşağıya bastırın. Aksi takdirde tutma kayışı hasar görebilir. Bu aynı zamanda uygulama sonrasında alet söküleceğinde veya penis üzerine etki eden sabitleme kuvveti, tutma kayı,ı bolla, trılarak daha az ayarlanacağında da geçerlidir.
- Hassas ayar vidalarını en alt yükseklığe ayarlayarak vidalayınız (dolayısıyla vida yivleri görünemeyecek şekilde olsun).
- Aletin doğru toplam uzunluğunu (bu uzunluk sertleşmiş penis uzunluğu artı 1,5 cm'dir), alet ile birlikte teslim edilen uzatma çubuklarını çıkararak veya değiştirerek kendiniz ayarlayınız. Çubukların uzunluğu 2, 4, 6 ve 8 cm'dir ve her birinin iç içe vidalanması mümkündür. Şu uzunluklar mümkündür: 10 cm (çubuklar 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
! Altı mini çubuk (sevk edildiğinde iki adet 1,5 cm uzunlukta birbirine bağlanmıştır) +0,5, +1,0 veya +1,5 cm uzunluktaki hassas ayar için kullanılır.

PENIMASTER`İN® TAKILMASI

- Elinizle penis yaklaşık 1 dakika süre boyunca gerin. Sarkık penis ek parçadan geçiniz.
- BAĞLAMA VERSİYONU I** – Sünnet derisini daha fazla uzatma: Sünnet derisini daha güçlü veya penis uzamasından çok daha fazla oranda uzatmak (örneğin kaybolan sünnet derisini tekrar kazanmak için) için onfor bandını kalan sünnet derisinin üzerine gerektiğinde penis başına biraz mesafe bırakarak dolayın. Böylece deri daha yoğun şekilde gerilir ve büyümek için daha fazla uyarılır.
BAĞLAMA VERSİYONU II – Sünnet derisini penise doğru orantıda uzatma: Sünnet derisini aynı penisin büyütüldüğü uzunluk kadar uzatmak için sünnet derisini geri çekin ve konfor bandını direkt penis başının arkasında bir pozisyonda penise dolayın. Bu şekilde yapılan bağlamada deri daha az gerilir ve büyüme için bağlamada versiyonu I'dekinden daha az uyarılır.
- Tutma kayışını konfor bandının üzerine, penisin anatomik eğriliği (her iki „kulaklar“ arasında) penis başına bakacak şekilde takın. *Kendinizi rahat hissetmeniz durumunda konfor bandı birkaç kat penis üzerine dolanabilir; aksi takdirde kayış gerektiği şekilde kısaltılacak veya hiç kullanılmayacaktır.*
- Tutma kayışının iki ucunu tekrar takma yüzeyinin yanlarına geçirin. Derinin sıkışmasını önlemek amacıyla penis ve takma yüzeyi arasına parmağınızı koyun ve kayışın uçlarını sıkıca sıkın ve sonra parmağınızı çıkarın.
- Penis bu durumda tutma yüzeyinde güvenli şekilde sabitlenmiştir.
(!) *Penisi aşırı şekilde ezmemeye dikkat ediniz!* Penis veya penis başının rengi değiştiğinde derhal tutma kayışını açın ve penise masaj uygulayarak kan dolaşımını sağlayın. Özellikle ilk günlerdeki alıştırma sürecinde, penisin dış görünümünde ve fonksiyonunda, herhangi olumsuz değişikliği meydana gelip gelmediğini gözlemleyin ve gerektiğinde semptomlar geçinceye kadar kullanıma ara veriniz.
- Tutma yüzeyini, gerili olan penis ile birlikte çubuklar üzerine bastırın.
- Aleti isterseniz vücudunuzdan aşağıya isterseniz yukarıya doğru taşıyabilirsiniz, her iki durumda da aynı sonuca erişeceksiniz.
- PeniMaster`in® çekim gücünü vida yivini dışarı çevirerek ayarlayınız („Çekim gücünün ayarlanması“ bölümünde açıklanan bilgilere bakınız).

ÇEKİM GÜCÜNÜN AYARLANMASI

Tutucu çubukların sonunda 5`ER KEZ KERTİK VURULMUŞ OLAN DEMİR ÇUBUKLAR BULUNMAKTADIR. Bunlar yaylı terazi prensibi gereğince, peniste meydana gelen çekim gücünü belirtmektedir:

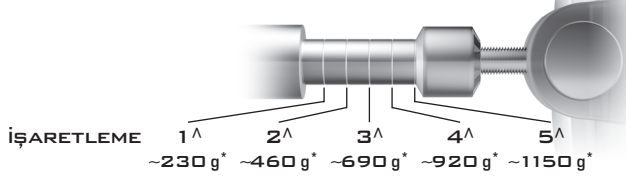

Yaylı terazinin okunmasına ilişkin örnek:

Örneğin alet yerleştirildikten sonra, 5 kertiğten sadece 3`ü görülebilecek şekilde yaylarınsa, ayarlanmış olan çekim gücü 460 ve 690 gram arasında olmaktadır. Yalnızca son kertiği görebildiğinizde, çekim gücü 920 ve 1150 gram arasında olmaktadır.

Uyarı: Cıvata dışı ancak, penis doğru çubuk uzunluğu (yukarıya bakınız) seçimi sonucunda hafifçe gerildiğinde dışarı döndürülecektir. Aksi takdirde herhangi bir çekim gücü oluşturulmaz veya oluşturulan çekim gücü yeterli değildir! Alete kolay alışabilmek için uygulama başlangıcında çekim gücünü çok küçük olarak (örneğin 0 gram ve 230 gram arası) ayarlayın. Bu alışma safhası iki haftaya kadar sürebilir. Mümkün olan en yüksek çekim gücünü ayarlayarak aleti herhangi bir sorun yaşamadan 60-90 dakika boyunca taşıyarak penisinizi bu uygulamaya mükemmel şekilde alıştırebilir ve uygulama antrenmanları yapabilirsiniz.

Uyarı: Belirli bir süre sonra penisiniz uzadığında ve çekim gücü bu nedenle etkisiz kaldığında çekim gücünü ayarlayın! Çekim gücünü kullanılan haftalar boyunca sadece bir kertik görününceye kadar yavaşça yükseltin. Ağrı hissetmeniz durumunda PeniMaster® aletinin ayarını tekrar azaltın!

AŞIRI VE AĞRI VERİCİ TUTMA VE ÇEKİM GÜCÜ AYARLARI HÜCRE DOKUSUNUN BÜYÜMESİNE NEGATİF ETKİDE BULUNABİLİR!

[!] 1150 gramdan fazla çekim gücüne emniyet açısından, bu ayarda herhangi sorununuzun olmayacağıni düşünseniz bile, ayarlamamanız gerekir.

TAŞIMA SÜRESİ

PeniMaster® günde en az 3 saat takılı bırakılacaktır. Daha uzun taşıma süreleri sonucu iyileştirecektir! 60 ile 90 dakika taşıma süresinden sonra 15 dakikalık mola verin ve kan dolaşımını sağlamak için penise masaj yapın. Verilecek bu kısa molalar penisin büyümesini teşvik edecektir!

PeniMaster® aletini alışma süresinden sonra geniş, bir pantolon içinde günde istediğiniz süre kadar (daima her 60 ile 90 dakika arasında mola vermeyi ihmal etmeyin!) takabilirsiniz. Günde 6 saat veya üzerindeki taşıma süreleri mükemmel büyüme sonuçlarının elde edilmesini sağlar. Genel olarak PeniMaster® aletini azami olarak kaç ay takabileceğiniz ile ilgili bir sınırlama yoktur. Hatta: PeniMaster® aletini ne kadar uzun süre kullanırsanız sonuç ta o kadar kesin olur.

Görülebilen en küçük bir başarının elde edilebilmesi için alet, bir ay boyunca günde en az 3 saat takılmalıdır. İlk dört hafta hafta içinde elde edilen başarı kısmen doku genişlemesine bağlı bir başarıdır ve elde edilen bu başarı kalıcı olmayabilir. Uyku esnasında taşıma molaları verilemeyeceğinden aletin uyurken takılması tavsiye edilmez. Sadece aleti takacak yeterli zaman bulamadığınızda ve yeterli taşıma saatlerine erişemediğinizde aletin uykuda takılması konusunu gözden geçirebilirsiniz. Aleti uykuda takmadan önce kullanıcı, aleti doğru ayarlama konusunda yeterli tecrübeye sahip olmalı ve uyanık durumdayken birkaç saat aleti taşıyarak tecrübe sahibi olmuş olmalıdır.

Örneğin seyahatte olmanız nedeniyle PeniMaster`i® bazen birkaç gün veya daha uzun bir süre taşıyamadığınız durumlarda, iyi bir sonucu ulaşmanız açısından endişelenmeyiniz: O zamana kadar geliştirdiğiniz büyüme kalıcıdır ve yeniden tedaviye devam ettiğinizde gelişme devam eder. Ve şunu da unutmayınız, bu metotla penisin **büyümesi** gerçekleştirilmektedir – ve bu da doğal olarak zamana ihtiyaç duymaktadır! Dolayısıyla güven duyunuz ve bir kaç günden sonra henüz bir netice göremediğiniz durumda, sabrınızı kaybetmeyiniz: Dayanıklılığınız daha uzun bir penisle mükafatlandırılacaktır!

HİJYEN TALİMATI

PeniMaster`in® aletinden uzun süre memnun kalmanız için lütfen, penis ve PeniMaster`in® kullanmadan önce ve sonra ılık su ve sabun ile temizleyin. Penis ve aleti daha sonra iyice kurulayınız. Bu davranış genelde sağlığa yararlı ve iltihaplanmaların engellenmesine yardımcı olmakta ve penisin tutma kayışı tarafından daha iyi sabitlenmesini sağlamaktadır. Aksi takdirde kayış vücut yağı, pudra veya yağlı ürünler nedeniyle penis üzerinden daha hızlı şekilde kayacaktır.

Alet paslanmazdır ve su ile irtibat ettiğinde herhangi bir hasar oluşmaz.

KULLANIMLA İLGİLİ EMNİYET YÖNTEMLERİ VE İKAZ İŞARETLERİ

PeniMaster`in® kullanımından meydana gelen kalıcı yan etkilere rastlanmamıştır. Kullanım esnasında tutucu lastiklerin bölgesindeki cildin kan dolaşımının küçük çapta değişmesi dolayısıyla, hafif olarak ilgili bölgenin kızarması normaldir. Bunlar ağrı vermemektedir ve PeniMaster`i® çıkardıktan sonra çabuk girelmektedir.

PeniMaster`i® çıkardıktan sonra, cildi rahatlatmak için penis bir nemlendirici losyonla kremlemek uygun olabilir.

Lütfen yine de aşağıda belirtilen emniyet kurallarına ve ikaz işaretlerine dikkat ediniz:

PENIMASTER`İN® AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLARDA KULLANILMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİR.

- alkol kullanıldığında
- Uyuşturucu kullanıldığında
- sakinleştirici maddelerin etkisi altında
- uyku ilaçları etkisi altında ve ağrı duygularını uyuşturan ilaçların etkisi altında
- bilinen krom alerjisinde ve polikarbonat (PC) ve TPE`ye aşırı hassasiyet olduğunda
- Peniste, haya torbası veya idrar yollarında genel olarak bilinen sorunlarda
- damar-veya bağdokusu yetersizliği gibi diğer hastalıklarda
- peniste veya haya torbasında halen mevcut ağrılar olduğunda
- Penis protezleri kullanıldığında

PeniMaster`in® uygulanması esnasında penis, haya torbası veya penis başı fonksiyonunda ani ağrı,doku renginin değişmesi veya diğer dış iritasyonlar gibi değişiklikler meydana geldiğinde uygulamaya derhal ara verilecek ve ancak bu şikayetler sona erdikten sonra devam edilecektir. Ara verildikten sonra bu semptomlar kaybolmadığında veya arttığında, ihtiyaten bir doktora (üroloğa) gitmeniz tavsiye edilir. Bedensel kısıtlamalar veya bilinen bir hastalık dolayısıyla sizin için PeniMaster`in® kullanımı ve uygunluğu açısından emin olmadığınızda, kendiniz uygulamadan önce lütfen doktorunuza (üroloğunuza) danışınız.

TILLYKKE

Kære kunde!

mange tak for købet af PeniMaster®. Du har valgt det eneste kendte smertefrie og varige princip til at forandre din penis uden risikofuld operation. Når PeniMaster® bruges iht. betjeningsvejledningen bliver penis både i slap og i erigeret tilstand tykkere og længere. Desuden kan PeniMaster® anvendes til korrektion af uønsket peniskrumning og om ønsket også til forlængelse af forhuden (fx hos omskårede brugere).

Den forbedrede cirkulation og træning af penismuskulaturen forøger i mange tilfælde lysten og erektionsevnen plus at man holder længere. Mange benyttede kommer over deres mangeårige komplekser ved at bruge PeniMaster® og kan endelige nyde et frit og ukompliceret seksualliv. Det bliver tit også nemmere at finde en partner, når man ved, at man "står godt" fysisk.

PeniMaster® kan anvendes alene uden problemer og uden hjælp af andre (fx læge). PeniMaster® opnår lige gode resultater hos omskårede og ikke-omskårede brugere. PeniMaster® er et professionelt apparat og egnet til enhver alder. Trods alt anbefaler vi, at apparatet først bruges når man bliver myndig, så at penis har opnået sin naturlige længde før behandlingen begynder.

FUNKTIONSPRINCIP

Funktionsprincippet af PeniMaster® er meget enkelt: Gennem permanent trækvirkning over længere tid stimuleres penisens cellevækst. Nye kropsceller opstår, penis bliver længere og tykkere. Uregelmæssig vævsfordeling i penis – årsag til peniskrumning – bliver udjævnet gennem nyt væv.: Penis bliver mere lige. Med PeniMaster® kan forhuden strækkes mere end den øvrige penis. På den måde er en forhudsførlængelse også mulig (se vejledning).

Henvisning: Selv om penis ser tyndere ud under behandlingen, har den efter behandlingen samme omfang eller er endda blevet tykkere!

Vækstprincippet gennem strækning er også indgået i lægekunsten og bruges fx inden for ortopæd- eller plastikkirurgien, hvor man ligeledes arbejder med specielle strækningsapparater.

Denne metode, at forlænge penis gennem varig strækning, bliver i øvrigt allerede anvendt i århundreder: Stammen Karamojong (indfødte i Norduganda) eller stammen Sadhus (Indien) opnår gennem anbringelse af vægt ved penis imponerende resultater (se Encyclopaedia Britannica; Stern Nr. 49/95).

BENYTTELSE AF PENIMASTER®

ANVENDELSE

Succes af PeniMaster® afhænger til dels af trækraften, der virker på penis, til dels af anvendelsesperioden. Kun en god balance mellem trækraft og brugstid sørger for optimale resultater!

[!] *Principielt bør det altid være behageligt at bære PeniMaster®, under ingen omstændigheder må det gøre ondt! Smarter er et sikkert tegn på fejlagtig anvendelse fx pga. for stor indstillet træk- eller holdekræft!*

FORBEREDELSE FØR BRUG

- Træk holdeskinnen fra holdestængerne.
- Træk holderemmen ud af sliderne ved holdeskinnen.
VIGTIGT: Tryk herved begge fikseringsvinger på holdeskinnens underside ned. Ellers kan holderemmen blive beskadiget. Det samme gælder også ved fjernelse efter brug eller når fikseringskraften, der virker på penis, skal indstilles svagere ved løsning af holderemmen.
- Skrub finjusteringsskrueene til mindste højde (at man ikke længere kan se skruegevind).
- Indstil apparatets korrekte total længde (svare ca. til længden af den stive penis plus 1,5 cm) gennem fjernelse, udskiftning eller forskrining af medleverede forlængerstænger. Stængerne har en længde på 2, 4, 6 og 8 cm og kan alle forskrues med hinanden. Dermed har man følgende forlængemuligheder: 10 cm (stænger 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).

[!] *De seks minustænger (ved levering sammenskruet til to stænger med hver en længde på 1,5 cm) bruges til finindstilling af +0,5 cm, +1,0 cm eller +1,5 cm.*

ANBRINGELSE AF PENIMASTER®

- Stræk penis med hånden i ca. 1 minut. Før den slappe penis gennem basisringen.
- FIKSERINGSMULIGHED I** – Stærkere forlængelse af forhud: For at kunne forøge forhuden stærkere hhv. overproportional i forhold til penis (fx for at få forhud tilbage hos omskårede personer), lægges komfortbåndet over resterende (for)hud – evt. med lidt afstand til penishovedet – og rundt om penis. På den måde strækkes huden mere intensivt, og væksten stimuleres yderligere.
FIKSERINGSMULIGHED II – Forhud forlænges proportional til penis: For at forhuden kun vokser så meget som penis, trækkes forhuden tilbage og komfortbåndet lægges rundt om penis direkte bag penishovedet. På den måde strækkes og stimuleres hudvæksten mindre intensivt og ringere end i fikseringsmulighed I.
- Læg holderemmen over komfortbåndet, så at den anatomisk formede bøjning i holderemmen (mellem de to „ører“) viser mod penishovedet. *Såfremt dette er behageligt, kan komfortbåndet snos flere gange om penis eller afkortes tilsvarende eller fjernes.*
- Sæt de to holderemsendere tilbage i holdeskinnens slider. For at undgå at hud kommer i klem i holdeskinnens slider, læg en finger mellem penis og holdeskinn. Træk holderemmens ender fast, og tag derefter fingeren ud.
- Nu er penis fikseret i holdeanordningen. [!] *Undgå, at kvæste penis for meget!* Skulle penis eller penishovedet blive misfarvet, løs omgående holderemmen, og udfør en massage for at fremme blodcirkulationen. Især i begyndelsen skal der nøje holdes øje med penis, om der opstår negative forandringer i udseende eller funktion. Hold en pause, indtil symptomerne er gået over.
- Tryk holdeskinnen med anbragte penis ned på enden af stængerne.
- Apparatet kan valgfrit bæres op- eller nedad med samme gode resultat.
- Reguler trækraften af PeniMaster® gennem udskrining af skruegevindene (se også næste punkt „Indstilling af trækraft“).

INDSTILLING AF TRÆKKRAFT

For enden af holdestængerne befinder sig hver **5 INDSKÅREDE MARKERINGER I METALSTÆNGERNE**. Disse angiver iht. fjedervægtprincippet, hvor stor trækraften er, der virker på penis:

MARKERING

1 ~230 g* 2 ~460 g* 3 ~690 g* 4 ~920 g* 5 ~1150 g*

Eksempel til aflæsning af fjedervægten: Fjeder apparatet fx efter anbringelse så meget, at kun 3 af de 5 markeringer kan ses, er den indstillede trækraft mellem 460 g og 690 g. Kan man kun se den sidste markering, er trækraften mellem 920 g og 1150 g.

For at forøge penisstrækningen, drejes de to indstillingsskruer jævnt mod urets retning. Dermed forøges apparatets total længde. Til reduktion af trækraften, drejes indstillingsskruerne i modsatte retning (med uret).

Henvisning: Skruegevindtet må først skrues ud, når penis allerede er lidt strakt gennem valg af rigtige stanglængde (se foroven). I modsat fald kan der ikke eller ikke tilstrækkelig oprettes trækraft! For at værne sig til apparatet indstilles trækraften ved behandlingsbegyndelse kun svagt (fx mellem 0 g og 230 g). Dette kan vare op til 2 uger. Penisens trænes optimalt, når altid den størst mulige trækraft indstilles, med hvilken apparatet problemfrit kan bæres i 60 - 90 minutter.

Henvisning: Skulle penis en stykke tid efter apparatanbringelse give efter og bliver trækraften dermed svagere, reguleres venligst trækraften! Trækraften forøges langsomt over flere uger; indtil man helst kun kan se en markering på fjedervægten. Ved smerter indstilles PeniMaster® venligst svagere!

FOR STORE ELLER SMERTEFULDE HOLDE- OG TRÆK- KRÆFTER KAN PÅVIRKE CELLEVÆKSTEN NEGATIVT!

[!] Belastninger over 1150 g bør af sikkerhedsgrunde ikke indstilles, selv om man føler, at det går problemfrit.

ANVENDELSESTID

PeniMaster® bør bruges dagligt i mindst 3 timer. Længere bæreprioder forbedrer resultatet! Efter hver 60. til 90. minut bør der holdes en pause på ca. 15 minutter, og penis masseres for at stimulere cirkulationen. Disse korte pauser fremmer vækstprocessen!

Efter tilstrækkelig tilvænnning kan PeniMaster® bruges dagligt under vidt tøj lige så længe man ønsker (husk pauserne hver 60. til 90. minut). Anvendelsestider på 6 og mere timer pr. dag fører til optimale vækstresultater. Principielt er der ingen tidsmæssig begrænsning hvor mange måneder man højst kan bruge PeniMaster®. Tværtimod: Jo længere PeniMaster® bæres, jo tydeligere bliver resultatet. For et synligt resultat skal man mindst bære apparatet i 3 timer dagligt i en hel måned. Resultater, der opstår efter de første 4 uger, kan basere på væveskænkning og er muligvis ikke vedvarende. Da man ikke kan overholde bærepause, anbefales det ikke at bære apparatet mens man sover, og dette bør man kun gøre, hvis man ikke kan opnå tilstrækkelige brugstider om dagen. Før anvendelsen i søvne skal brugeren allerede have samlet rigeligt erfaring med den korrekte indstilling til brug over flere timer i vågentilstand.

Selv om PeniMaster® ikke bæres i flere dage eller i længere tid, fordi man er ude at rejse, bør man ikke være bekymret:

Den hidtil opnåede vækst opretholdes og fortsætter så snart anvendelsen begynder igen. Husk, at penis vakser gennem denne behandling – og at dette kræver naturlig tid! Vær tillidsfuld og tålmodig, selv om man efter få dage endnu ikke kan se et resultat: Din konsekvens bliver belønnet med en "skræddersyet penis"!

HYGIEJNEHENVISNINGER

Så at du længe har glæde af din PeniMaster®, bør du rense din penis og apparatet før og efter hver anvendelse med lunkent vand og sæbe. Derefter tørres penis og apparatet godt. Dette udføres af almindelige hygiejnegrunde, og samtidigt forebygger det betændelse og gør fikseringen af penis i basisringen nemmere. Basisringen glider nemlig hurtigere ned fra penis pga. kropsfedt, puder eller fedtholdige plejeprodukter.

Apparatet er rustfrit og bliver ikke beskadiget gennem vand.

FORSIGTSFORANSTALTNINGER VED AN- VENDELSE OG ADVARSELHENVISNINGER

Blivende bivirkninger pga. anvendelsen af PeniMaster® er ikke kendt. Under anvendelsen kan der optræde små hudirritationer (rød hud) i holderemmens område, som er normale og opstår gennem den mekaniske belastning. Hudirritationerne er ikke smertefulde og forsvinder hurtigt igen efter fjernelse af PeniMaster®.

Efter anvendelse af PeniMaster® kan det være fordelagtigt, at creme penis med bodylotion for at afslappe og pleje huden.

Overhold følgende forsigtighedsforanstaltninger og advarselshenvisninger:

PENIMASTER® MÅ IKKE BRUGES

- under alkoholpåvirkning
- under narkotikapåvirkning
- under påvirkning af beroligende midler
- under påvirkning af sovemedicin eller midler, der nedsætter smertefølelse
- ved kendt kromallergi eller reaktion på polycarbonat (PC) og TPE
- ved kendte penis-, testikel- eller urinrørsproblemer
- ved vene- eller bindevævssvaghed
- ved eksisterende eller optrædende smerter i penis eller testiklerne
- ved penisimplantater

Skulle der under anvendelsen af PeniMaster® pludselig optræde smerter, misfarvninger eller andre udvendige irritationer eller funktionsforandringer af penis eller penishoved, skal behandlingen omgående afbrydes og først fortsættes efter at symptomerne er gået over. Skulle symptomerne trods behandlingsafbrydelse ikke forsvinde eller endda blive værre, skal en læge (urolog) kontaktes af sikkerhedsgrunde. Er du ikke sikker på, om du kan bruge PeniMaster® pga. kropsmæssig indskrænkning eller en kendt sygdom, bør du før anvendelse spørge din læge (urolog).

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Geachte klant!

Bedankt voor de aankoop van de PeniMaster®. Daarmee hebt u voor het enige bekende principe gekozen om uw penis zonder riskante operaties en zonder pijn blijvend positief te veranderen. Indien u de PeniMaster® volgens deze gebruiksaanwijzing toepast, zal uw penis zowel in slappe toestand als in erectie langer en dikker worden. Bovendien is de PeniMaster® geschikt om ongewenste krommingen van de penis te corrigeren of de voorhuid te verlengen (bijvoorbeeld voor gebruikers met een besneden penis).

De verbeterde doorbloeding en de training van de spieren in de penis bevorderen in veel gevallen het lustgevoel, het erectievermogen en het seksuele uithoudingsvermogen. Veel gebruikers overwinnen door het succes met de PeniMaster® jarenlange complexen waardoor zij belemmerd waren in een vrij en onbevangen seksleven. Ook het zoeken naar een partner wordt vaak eenvoudiger met het bewustzijn, dat men er ook in lichamelijk opzicht "goed voor staat".

U kunt de PeniMaster® probleemloos zelf zonder de hulp van derden (bijv. een arts) gebruiken. Met de PeniMaster® worden zowel bij besneden als onbesneden gebruikers dezelfde goede successen geboekt. PeniMaster® is een professioneel, toestel dat geschikt is voor alle leeftijden. Wij raden echter aan, het toestel pas op volwassen leeftijd te gebruiken, zodat de penis voor de behandeling zijn natuurlijke lengte bereikt heeft.

FUNCTIEPRINCIPE

Het functieprincipe van de PeniMaster® is heel eenvoudig: door de constante uitoefening van trekkracht gedurende een langere periode, wordt het celweefsel van de penis gestimuleerd om te groeien: er ontstaan nieuwe lichaamscellen en de penis wordt langer en dikker. Onregelmatige verdelingen van het weefsel in de penis – de oorzaak van krommingen in de penis – worden door nieuw weefsel gecompenseerd: de penis wordt rechter. Met de PeniMaster® kan de voorhuid sterker dan de rest van de penis gerekt worden. Daarom is het, indien nodig, ook mogelijk om de voorhuid te verlengen (zie gebruiksaanwijzing).

Let op: Hoewel de penis tijdens het rekken dunner lijkt, zal hij na de behandeling weer zijn oorspronkelijke omvang hebben of zelfs dikker zijn!

Het principe van groei door uitrekking wordt in de geneeskunde bijvoorbeeld ook in de orthopedie of in de huidchirurgie gebruikt, waar eveneens gebruik gemaakt wordt van speciale toestellen voor het rekken.

De mogelijkheid om de penis te verlengen door constante uitrekking, wordt overigens reeds eeuwenlang gebruikt: de Karamojong (een inheems volk in het noorden van Uganda) of de Sadhus (India) bereiken door het bevestigen van gewichten aan de penis indrukwekkende resultaten (zie Encyclopaedia Britannica ; Stern nr. 49/95).

HET GEBRUIK VAN DE PENIMASTER®

TOEPASSING

Het succes van de PeniMaster® hangt aan de ene kant af van de trekkracht die op de penis uitgeoefend wordt en aan de andere kant van de duur van de toepassing. Alleen een goed evenwicht tussen trekkracht en draagduur garandeert optimale resultaten!

[!] *In principe moet het dragen van de PeniMaster® voor u altijd aangenaam zijn, u mag in geen geval pijn voelen! Pijn is een duidelijk teken voor een verkeerde toepassing, bijvoorbeeld door een te strak ingestelde trek- of houdkracht!*

VOORBEREIDINGEN VOOR HET AANDOEN

- a) Trek het draagvlak van de houderstangen.
- b) Trek de houderriem uit de spleten van het draagvlak.
BELANGRIJK: Daarbij moet u de twee bevestigingsvleugels aan de onderkant van het draagvlak naar beneden drukken. Anders kan de houderriem beschadigd raken. Dit geldt ook voor het afdoen na de behandeling of wanneer de fixeerkraft op de penis door het losser maken van de houderriem zwakker ingesteld moet worden!
- c) Draai de schroeven voor de fijne afstelling op de kleinste hoogte (zo dat geen schroefdraad meer zichtbaar is).
- d) Stel de juiste totale lengte van het toestel (stemt ongeveer overeen met de lengte van uw stijve penis plus 1,5 cm) door verwijderen, vervangen of in elkaar schroeven van de meegeleverde verlengstangen in. De stangen hebben een lengte van 2, 4, 6 en 8 cm en kunnen telkens in elkaar geschroefd worden. Daardoor zijn de volgende lengtes mogelijk:
10 cm (stangen 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
[!] *De zes ministangen (bij de levering tot twee stangen van elk 1,5 cm in elkaar geschroefd) dienen voor de fijne afstelling van +0,5, +1,0 of +1,5 cm.*

AANDOEN VAN DE PENIMASTER®

- 1) Rek de penis handmatig gedurende ongeveer een minuut.
Voer de slappe penis door het aanzetstuk.
- 2) **BEVESTIGINGSVARIANT I** – voorhuid sterker verlengen: om de voorhuid sterker of buitenproportioneel t.o.v. de penis te laten groeien (bijv. om voorhuid terug te winnen bij een besneden penis), legt u de comfortband over de overgebleven (voor)huid om de penis, indien nodig ook met een kleine afstand naar de eikel. Op deze manier wordt de huid intensiever gerekt en wordt de groei bevorderd.
BEVESTIGINGSVARIANT II – voorhuid proportioneel t.o.v. de penis verlenen: om de voorhuid net zoveel als de penis te verlenen, trekt u de voorhuid terug en legt u de comfortband direct achter de eikel rond de penis. Op deze manier wordt de huid minder sterk gerekt en wordt de groei minder bevorderd dan bij bevestigingsvariant I.
- 3) Leg de houderriem over de comfortband, zodat de anatomisch gevormde kromming in de houderriem (tussen de twee "oren") naar de eikel wijst. *Indien dit aangenaam is, kan de comfortband meerdere keren rond de penis gewikkeld worden, anders moet de band op de juiste lengte ingekort of weggelaten worden.*
- 4) Steek de twee uiteinden van de houderriem weer in de spleten van het draagvlak. Om geen huid in de spleten van het draagvlak te klemmen, moet u nu een vinger tussen de penis en het draagvlak leggen. Trek de uiteinden van de houderriem vast aan en trek vervolgens de vinger onder de riem uit.
- 5) De penis is nu op het draagvlak bevestigd. [!] *Klem de penis niet overmatig in!* Indien de penis of de eikel van kleur veranderen, moet u de houderriem onmiddellijk losmaken en de bloedcirculatie weer op gang brengen door massage. Let er in het bijzonder in de eerste dagen van de gewenningsfase op, of u negatieve veranderingen in het uiterlijk of de functie van de penis opmerkt en houd een pauze totdat de symptomen langzaam verdwijnen.
- 6) Druk het draagvlak met de ingespannen penis op het uiteinde van de verlengstangen.
- 7) U kunt het toestel met precies hetzelfde goede resultaat naar keuze naar boven of naar beneden dragen.
- 8) Regel de trekkracht van de PeniMaster® door de schroefdraad uit te schroeven (zie ook het volgende hoofdstuk "Instellen van de trekkracht").


INSTELLEN VAN DE TREKKRACHT

Op het uiteinde van de houderstangen bevinden zich telkens

VIJF INGEKERFDE MARKERINGEN IN DE METALEN STANGEN.

Deze geven volgens het principe van een veerbalans aan, hoe sterk de uitgeoefende trekkraft op de penis is:

MARKERING

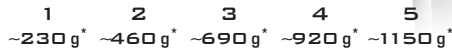

Voorbeeld voor het aflezen van een veerbalans: veert het toestel bijvoorbeeld na het aandoen zo ver door, dat u nog maar 3 van de 5 markeringen kunt zien, dan bedraagt de ingestelde trekkraft tussen 460 g en 690 g. Kunt u alleen nog de laatste markering zien, dan bedraagt de trekkraft tussen 920 g en 1150 g.

Om de trekkraft op de penis te verhogen, draait u de twee instelschroeven gelijkmatig linksom. Hierdoor wordt de totale lengte van het toestel vergroot. Om de trekkraft zwakker in te stellen, draait u de instelschroeven in de andere richting (rechtsom).

Let op: schroefdraad mag pas uitgeschroefd worden, nadat de penis door de keuze van de juiste lengte van de stangen (zie boven) al lichtjes gerekt wordt. Anders kan er geen of onvoldoende trekkraft opgebouwd worden! Stel de trekkraft aan het begin van de behandeling zwak in (bijv. tussen 0 g en 230 g) om aan het toestel gewend te raken. Deze gewenningsfase kan tot twee weken duren. U traint uw penis optimaal, door altijd de hoogst mogelijke trekkraft in te stellen, waarmee u het toestel zonder problemen 60 tot 90 minuten kunt dragen.

Let op: Als de penis enige tijd na het aandoen "narekt" en de trekkraft daardoor zwakker wordt, moet u de trekkraft bijstellen! Verhoog de trekkraft langzaam in het verloop van weken tot u indien mogelijk nog slechts één markering op de veerbalans kunt zien. Als u pijn voelt, moet u de PeniMaster® a.u.b. zwakker instellen.

EEN OVERMATIGE OF PIJNLIJKE HOUD- OF TREKKRACHT KAN EEN NEGATIEF EFFECT HEBBEN OP DE GROEI VAN DE CELLEN!

[!] Belastingen van meer dan 1150 g mogen om veiligheidsredenen niet ingesteld worden, zelfs niet wanneer u het gevoel hebt, dat u daarmee geen problemen hebt.

DRAAGDUUR

U zou de PeniMaster® dagelijks minstens 3 uur moeten dragen. Een langere draagduur verbetert het resultaat! Na telkens 60 tot 90 minuten houdt u a.u.b. een pauze van ca. 15 minuten en masseert u de penis, om de doorbloeding te stimuleren. Deze korte pauzen bevorderen het groeiproces!

U kunt de PeniMaster® – na een voldoende lange gewenningsfase – iedere dag zo lang als u wilt onder wijde kleding dragen (denk a.u.b. aan een pauze om de 60 tot 90 minuten!). Een draagduur van zes of meer uren per dag heeft een optimaal groeiresultaat tot gevolg. In principe bestaan er geen beperkingen, hoeveel maanden u de PeniMaster® maximaal mag gebruiken. Integendeel: hoe langer u de PeniMaster® draagt, hoe duidelijker de resultaten worden. Het minimum voor een zichtbaar succes is een draagduur van ongeveer drie uur per dag gedurende een maand. Resultaten die tijdens de eerste vier weken bereikt worden, kunnen gedeeltelijk op een rekking van het weefsel gebaseerd zijn en zijn eventueel niet blijvend. Omdat tijdens het slapen geen pauzen gehouden kunnen worden, raden wij niet aan om het toestel 's nachts te dragen. Dat mag alleen overwogen worden als er anders geen voldoende draagduur bereikt kan worden. Vóór een gebruiker het toestel 's nachts mag gebruiken, moet hij in wakkere toestand voldoende ervaring opgedaan hebben met de voor hem juiste instellingen voor een gebruik gedurende meerdere uren.

Maakt u zich geen zorgen over uw goede resultaten, wanneer u de PeniMaster® meerdere dagen of gedurende een langere periode niet kunt dragen, omdat u bijvoorbeeld op reis bent: de tot dusver bereikte groei blijft behouden en wordt voortgezet wanneer u weer met de behandeling begint. En houd er a.u.b. rekening mee dat uw penis door de behandeling **groeit** – daarvoor is uiteraard enige tijd nodig! Wees optimistisch en verlies uw geduld niet, indien u na enkele dagen nog geen resultaat kunt zien: u zult voor uw verhardingsvermogen beloofd worden met een "penis op maat"!

INFORMATIE OVER DE HYGIËNE

Omdat u lang plezier kunt beleven aan uw PeniMaster®, maakt u a.u.b. uw penis en de PeniMaster® voor en na iedere toepassing met lauwwarm water en zeep schoon. Droog de penis en het toestel vervolgens goed. Dit dient voor de algemene hygiëne, helpt ontstekingen te voorkomen en vergemakkelijkt bovendien de bevestiging van de penis met de houderriem. De riem glijdt sneller van de penis door lichaamsvet, poeder of verzorgingsproducten die vet bevatten.

Het toestel is vervaardigd uit roestvrij staal en zal door water niet beschadigd raken.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR HET GEBRUIK EN WAARSCHUWINGEN

Blijvende bijwerkingen door het gebruik van de PeniMaster® zijn niet bekend. Tijdens de het gebruik is een lichte roodheid van de huid in de zone van de houderriem ten gevolge van mechanische belasting normaal. Deze roodheid is niet pijnlijk en verdwijnt na het afdoen van de PeniMaster® weer snel.

Na de behandeling met de PeniMaster® kan het van voordeel zijn om de penis met een vochtinbrengende crème in te smeren om de huid te ontspannen.

Let a.u.b. op de volgende veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen:

DE PENIMASTER® MAG NIET GEBRUIKT WORDEN:

- onder de invloed van alcohol
- onder de invloed van drugs
- onder de invloed van kalmerende middelen
- onder de invloed van slaapmiddelen of middelen die de gevoeligheid voor pijn verminderen
- bij een bekende allergie voor chroom en bij een overgevoeligheid voor polycarbonaat (PC) en TPE
- bij bekende problemen met de penis, de testikels of de urinebuis
- bij zwakke aders of bindweefsel
- bij bestaande of optredende pijn in de penis of de testikels
- bij penisimplantaten

Als er zich tijdens de behandeling met de PeniMaster® plotseling pijn, veranderingen van de kleur of andere uiterlijke irritaties of functionele veranderingen van de penis, de eikel of de testikels voordoen, moet de behandeling meteen stopgezet worden en mag pas na het verdwijnen van de klachten voortgezet worden. Indien de symptomen na het stopzetten van de behandeling niet verdwijnen of erger worden, moet u voor de zekerheid naar een arts (bijv. een uroloog) gaan. Indien u door lichamelijke beperkingen of een bekende ziekte niet zeker bent of de behandeling met de PeniMaster® voor u geschikt is, dient u uw arts (uroloog) te raadplegen alvorens het toestel te gebruiken.

HJÄRTLIGA GRATULATIONER!!

Bästa kund!

Varmt tack för att Du köpt PeniMaster®. Du har därigenom valt den enda kända principen, för att varaktigt förändra din penis smärtfritt och utan riskfyllda operationer. Om Du använder PeniMaster® enligt denna bruksanvisning, kommer Din penis att bli längre och tjockare både i slakt och i eregerat tillstånd. Dessutom lämpar sig PeniMaster® för att rätta till oönskad penisböjning och som tillval även till att förlänga förhuden (t. ex för omskurna användare).

Den förbättrade genomblödningen och träningen av penis-muskulaturen ökar i många fall lustkänslorna, erektionsförmågan och den sexuella utålligheten. Många användare kommer genom sina framgångar med PeniMaster® över sina mångåriga komplex som hindrat dem från ett fritt och obehindrat sexualliv. Även sökandet efter en partner känns lättare, om man ur kroppslig synpunkt "mår bra".

Du kan själv använda PeniMaster® utan hjälp av någon utomstående (t. ex en läkare). Med PeniMaster® uppnår både omskurna och omskurna användare snabbt stora framgångar. PeniMaster® är ett professionellt redskap och avsett för alla åldrar. Vi rekommenderar dock användning först efter puberteten, så att penisens har fått sin slutgiltiga naturliga längd innan behandlingen.

FUNKTIONSPRINCIP

Funktionsprincipen hos PeniMaster® är enkel: Penisens cellvävnad får impulser för tillväxt genom dragningsinverkan under en längre tidsperiod: Nya kroppsceller utvecklas, penisens blir längre och tjockare. Oregelbunden fördelning av vävnaden i penisens – orsaken till böjd penis – jämnas ut genom ny vävnad: Penisens blir rakare. Med PeniMaster® kan förhuden sträckas mer än resten av penisens. På så sätt är det möjligt att vid behov genomföra en förhudsförlängning (se anvisningarna).

Anvisning: Fastän penisens ser tunnare ut under sträckningen, kommer den att återfå sitt ursprungliga omfång efter behandlingen, eller vara tjockare!

Principen tillväxt genom sträckning används inom medicinen till exempel inom ortopedin eller inom hudkirurgin. Även där används speciella sträckningsredskap.

Möjligheten att förlänga penisens genom kontinuerlig sträckning, har använts i århundraden: Karamojongerna (ursprungsbefolkningen i Nord-Uganda) eller Sadhuserna (Indien) uppnår imponerande resultat genom att sätta vikter på penisens (jfr. Encyclopedia Britanica; Stern Nr. 49/95).

ANVÄNDNING AV PENIMASTER®

ANVÄNDNING

Framgången med PeniMaster® hör för det första ihop med dragkraften på penis, för det andra med behandlingens längd. Endast en god balans mellan dragkraft och tid åstadkommer optimala resultat!

[!] *Grundregeln är att användandet av PeniMaster® alltid ska kännas angenämt och aldrig göra ont! Smärtor är ett säkert tecken på felanvändning. Antingen är dragkraften eller hållkraften för hårt inställda!*

FÖRBEREDELSE FÖR PÅMONTERING

a) Dra påläggsytan från hållstängerna.

b) Dra hållremmen ur slitsarna på påläggsytan.

VIKTIGT: Tryck samtidigt ner de båda stoppningarna till baksidan av hållpålägget. I annat fall kan hållremmen skadas. Detta gäller även för avlägsnandet efter användandet eller när fixeringskraften på penisens skall ställas in genom att lossa på hållremmen!

c) Skruva finjusteringsskruvarna till den lägsta höjden (så att inga skruvgångor syns längre).

(so dass kein Schraubgewinde mehr zu sehen ist).

d) Ställ in den rätta sammanlagda längden på utrustningen (motsvarar ungefär längden på Din styva penis plus 1,5 cm) genom att avlägsna, byta ut eller genom att skjuta ihop de medföljande förlängningsstängerna. Stängernas längder är 2, 4, 6 och 8 cm och de kan skruvas in i varandra. Detta erbjuder följande utbyggnadslängder: 10 cm (stänger 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).

[!] *De sex ministängerna (vid leveransen är det två stänger som var och en är 1,5 cm ihopskruvad) hjälper till att finjustera från +0,5, +1,0 eller +1,5 cm.*

PÅMONTERING AV PENIMASTER®

1) Sträck penisens för hand under cirka en minut. För den slaka penisens genom öppningsdelen.

2) **FIXERINGS-VARIANT I** – Starkare förlängning av förhuden: för att stärka förhuden respektive låta den växa överproportionellt i förhållande till penisens (t. ex. för att få tillbaka huden hos en omskuren penis), lägg komfortbandet över den resterande (för)huden, i förekommande fall också med lite avstånd till ollonet, runt penisens. På detta sätt sträcks huden mer intensivt och får starkare signaler till tillväxt.

FIXERINGS-VARIANT II – förlängning av förhuden proportionellt till penisens: För att få förhuden att växa enbart så långt som penisens är, drag då förhuden bakåt och lägg komfortbandet runt penisens direkt bakom ollonet. På detta sätt blir hudens sträckning svagare och impulsen för tillväxt mindre än i Fixeringsvariant I.

3) Lägg hållremmen över komfortbandet så att den anatomiskt utformade böjningen på hållremmen (mellan de båda "brönen") riktas mot ollonet. *Om det känns bekvämt, kan komfortbandet lindas flera varv runt penisens. I annat fall kan det kortas av eller tas bort.*

4) Stick de båda ändarna på hållremmen åter in i slitsen på påläggsytan. För att förhindra att hud kläms in i slitsen på påläggsytan, lägg ett finger mellan penis och påläggsytan. Dra åt ändarna på hållremmen hårt och flytta samtidigt bort fingret.

5) Penisens är nu fixerad på håll-underlaget. [!] *Undvik att snöra åt penisens för hårt!* Skulle penisens eller ollonet ändra färg, lossa omedelbart på hållremmarna och underlätta blodcirkulationen genom massage. Var särskilt observant under de första dagarnas invärjningsperiod, på penisens utseende och funktion. Om sådana symptom skulle uppträda, gör en paus tills symptomen har försvunnit.

6) Tryck påläggsytan med den fastspända penisens på slutet av stängerna.

7) Om du fäster utrustningen uppåt eller nedåt, påverkar inte det goda resultatet.

8) Reglera PeniMaster®s dragkraft genom att skruva ut skruvgångorna.

(Se även under nästa punkt "Inställning av dragkraften").

INSTÄLLNING AV DRAGKRAFTEN

På slutet av hållstängerna finns **5 STYCKEN INGRAVERADE**

MARKERINGAR I METALLSTÄNGERNA.

Dessa visar enligt fjädervägsprincipen, hur stark den utövade dragkraften på penis är:

MARKERING

1 ~230 g* 2 ~460 g* 3 ~690 g* 4 ~920 g* 5 ~1150 g*

Exempel för avläsning av fjädervägen: Fjädrar utrustningen efter påmonteringen t. ex så långt in, att Du bara kan se 3 av de 5 markeringarna, är den inställda dragkraften mellan 460 g och 690 g. Kan du bara se den sista markeringen, är dragkraften mellan 920 g och 1150 g.

För att öka sträckningen hos din penis, skruva vänligen bägge inställningsskruvarna lika mycket motsols. Därmed ökas den totala längden hos apparaten. För att ställa in dragkraften på ett lägre värde, skruva inställningsskruvarna i motsatt riktning (medsols).

Anvisning: skruvgångorna får först skruvas ut när penisen kan dras lätt utifrån den riktiga längden på stängerna. I annat fall blir dragkraften för låg eller uteblir helt! Ställ bara in svag dragkraft i början av behandlingen (t. ex mellan 0 g och 230 g), för att bli van vid utrustningen. Detta kan dröja upp till två veckor. Du tränar din penis optimalt, när du ställer in den högsta dragkraften som du kan klara av utan problem under 60–90 minuter.

Anvisning: Skulle penisen sträcka ut sig ytterligare en tid efter påmonteringen och dragkraften därigenom försvagas, måste du efterjustera dragkraften! Öka dragkraften långsamt under flera veckor tills Du om möjligt bara ser en markering på fjädervägen. Om smärtor skulle uppkomma, måste Du ställa in PeniMaster® svagare

FÖR HÖGA ELLER SMÄRTANDE HÅLL- OCH DRAGKRAFTER KAN PÅVERKA CELLTILLVÄXTEN NEGATIVT!

[!] Tyngder över 1150 g ska du av säkerhetsskäl inte ställa in, om du har känslan av att du inte har några problem med det.

ANVÄNDNINGSTID

Du ska använda PeniMaster® dagligen under minst tre timmar. Längre användningstider förbättrar resultatet! Gör en paus på 15 minuter efter cirka 60 till 90 minuter och massera penisen för att höja blodgenomströmningen. Dessa korta pauser förstärker tillväxtprocessen!

Efter tillräcklig invänjningstid kan Du använda PeniMaster® – dagligen under valfri tidslängd och under vidare kläder (kom ihåg pauserna var 60:e till 90:e minut!). Användningsperioder på 6 timmar eller mer per dag leder till optimala tillväxtresultat. Det finns egentligen ingen begränsning för hur många månader Du maximalt kan använda PeniMaster®. Tvärtom: Ju längre du använder PeniMaster®, desto tydligare blir resultatet. Minimum för ett synligt resultat ligger på en användningstid på cirka 3 timmar dagligen under en tidsperiod på en månad. Resultat som uppkommer under de fyra första veckorna, kan delvis bero på uttöjning av vävnaderna och är därför inte bestående. Eftersom man inte kan göra några användningspauser i sömnen, rekommenderas inte användning då, utom i undantagsfall. Innan utrustningen används under sömn måste användaren ha tillräcklig erfarenhet av vilka som är de riktiga inställningarna för användande under flera timmar för just honom.

Oroa Dig inte för att fördärva ditt goda resultat, även om du inte har möjlighet att använda PeniMaster® under flera dagar eller under en längre period. Anledningen kan vara att du t.ex är på resa. Det uppnådda resultatet består och fortsätter att utvecklas när du åter börjar med användningen. Kom ihåg att denna behandling gör att din penis växer – detta behöver naturligtvis sin naturliga tid! Tappa inte tålamodet om du efter några få dagar fortfarande inte ser något resultat: För din uthållighet belönas du med en "skräddarsydd" penis!

HYGIENANVISNINGAR

Så att du ska kunna ha glädje av Din PeniMaster® länge, vänligen rengör Din penis och PeniMaster® före och efter varje användning med ljummet vatten och tvål. Torka därefter av penisen och utrustningen väl. Detta är bra för den allmänna hygien, förebygger inflammationer och underlättar dessutom fixeringen av penis med hållremmen. Denna halkar lätt av från penis på grund av kroppsfetter, puder eller feta kroppsvårdsprodukter.

Utrustningen är rostfri och skadas därför inte av vatten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR INFÖR ANVÄNDADET:

Inga biverkningar är kända av användandet av PeniMaster®. Under användningstiden är det normalt med en lätt hudrodnad i området kring hållremmen på grund av den mekaniska påfrestningen. Denna gör inte ont och den avtar snabbt efter användningen av PeniMaster®.

Efter en användning av PeniMaster® kan det vara fördelaktigt att smörja in penisen med en fuktighetslotion för att mjuka upp huden.

Vänligen beakta följande försiktighetsåtgärder och varningsanvisningar:

PENIMASTER® FÅR INTE ANVÄNDAS:

- under alkoholpåverkan
- under drogpåverkan
- under påverkan av lugnande medel
- under påverkan av sömnmedel eller medel som sänker smärtkänsligheten
- vid kromallergi och vid överkänslighet mot Polycarbonat (PC) och TPE
- vid kända problem med penisen, testiklarna eller urinröret
- vid ven-eller bindvävsvagheter
- vid bestående eller uppkommande smärtor i penis eller i testiklarna
- vid penisimplantat

Om plötsliga smärtor, färgförändringar eller andra yttre irritationer eller funktionsförändringar hos penis, ollon eller testiklar skulle uppkomma genom användningen av PeniMaster®, skall behandlingen omedelbart avbrytas och först återupptas när symptomen avtagit. Skulle symptomen kvarstå eller försämrats efter avslutad behandling, uppsök för säkerhets skull en läkare (t. ex. en urolog). Skulle du på grund av kroppslig funktionsnedsättning eller känd sjukdom inte vara säker på om användningen av PeniMaster® är lämplig för Dig, fråga din läkare (urolog) innan Du påbörjar en behandling på egen hand.

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Vážený zákazniku!

Děkujeme Vám, že jste zakoupil PeniMaster®. Zvolil jste tím jediný známý princip, jak bez bolesti a trvale bez riskantní operace pozitivně ovlivnit Váš penis. Budete-li používat PeniMaster® podle tohoto návodu k použití, bude Váš penis jak v ochablém, tak i ve ztopořenému stavu delší a silnější. Navíc je PeniMaster® vhodný ke korekci nežádoucích zakřivení penisu a volitelně též k prodloužení předkožky (např. pro obřezané uživatele).

Zlepšené prokrvení a trénink svalstva penisu zvyšuje v mnoha případech pocit rozkoše, schopnost erekce a sexuální vytrvalost. Mnoho uživatelů z vítězí díky úspěchům s PeniMaster® nad dlouholetými komplexy, které jim bránily ve volném, sexuálním životě bez předsudků. Také hledání partnera je často snazší s vědomím, „být na tom z tělesného hlediska dobře“.

PeniMaster® můžete aplikovat sami bez pomoci třetích osob (např. lékaře). PeniMaster® dosahuje stejně dobrých výsledků jak u obřezaných, tak i neobřezaných mužů. PeniMaster® je profesionální lékařský přístroj a je vhodný pro každý věk. Přesto doporučujeme použití až po dovršení plnoletosti, aby penis před terapií dosáhl své přirozené délky.

PRINCIP FUNKCE

Princip funkce PeniMaster® je jednoduchý: Trvalým působením tahu po delší časové období se stimuluje buněčná tkáň penisu k růstu: Vznikají **nové** tělové buňky, penis se stává **delším a silnějším**. Nepravdělná rozmístění tkání v penisu – příčina pro zakřivení penisu – jsou vyrovnávána novými tkáněmi: Penis se napřimuje. Pomocí PeniMaster® je možné silněji než zbývající penis protahovat předkožku. Tak je v případě potřeby možné i prodloužení předkožky (viz návod).

Upozornění: I když penis během protahování vypadá tenčí, bude mít po terapii opět svůj původní obvod nebo bude silnější!

Princip růstu protažením využívá medicína například také v ortopedii nebo u kožní chirurgii, kde se rovněž aplikují speciální protahovací zařízení.

Možnost, prodloužit penis trvalým napínáním, je mimochodem používána po staletí: Karamojongové (domorodci v severní Ugandě) nebo Sandhuové (Indie) dosahují připevňováním závaží na penis pozoruhodných výsledků (srov. Encyclopaedia Britannica; Stern č. 49/95).

POUŽÍVÁNÍ PENIMASTER®

APLIKACE

Úspěch PeniMaster® závisí na jedné straně na napínací síle, působící na penis, na straně druhé na době aplikace. Optimální výsledky zaručuje jen dobrá rovnováha mezi napínací silou a dobou nošení!

[!] *Zásadně byste nošení PeniMaster® měli vždy vnímat jako příjemné, v žádném případě však jako bolestivé! Bolesti jsou bezpečnou známkou nesprávného používání, např. v důsledku příliš silně nastavených tahových nebo přidržovacích sil!*

PŘÍPRAVY PRO NASAZENÍ

- Stáhněte opěrnou plochu z přidržovacích tyček.
- Vytáhněte třmenový držák z drážek opěrné plochy.

DŮLEŽITÉ: Stlačte přitom obě aretační křídélka na spodní straně přidržovací opěrné plochy směrem dolů. Jinak může dojít k poškození třmenového držáku. Toto platí také při snímání po aplikaci nebo když upevňovací síla působící na penis má být snížena uvolněním třmenového držáku.
- Zašroubujte šrouby pro jemné nastavení na nejmenší výšku (tak, aby již nebyl vidět na šroubech žádný závit).
- Nastavte správnou celkovou délku přístroje (odpovídá přibližně délce. Vašeho ztopořenému penisu plus 1,5 cm) odstraněním, výměnou nebo zašroubováním dodávaných prodlužovacích tyček do sebe. Tyčky mají délku 2, 4, 6 a 8 cm a je možné je do sebe navzájem zašroubovat. V toho vyplývají následující možné konstrukční délky: 10 cm (tyčky 8+2); 12 cm (tyčky 8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).

[!] *Šest minityček (v dodávce sešroubované do dvou tyček, každé v délce 1,5 cm) slouží pro jemné nastavení +0,5, +1,0 nebo +1,5 cm.*

NASAZENÍ PENIMASTER®

- Natahujte penis rukou přibližně jednu minutu. Zaveďte neztopořený penis do nástavce.
- 2] **NASTAVENÍ VARIANTA I** – silnější prodloužení předkožky: Pro dosažení silnějšího růstu resp. růstu předkožky ve větším poměru vzhledem k penisu (např. k opětovnému vytvoření předkožky na obřezaném penisu), položte komfortní pásek přes zbývající (kůži) předkožku, popř. také v určité vzdálenosti k žaludu, kolem penisu. Tímto způsobem je kůže intenzivněji natahována a silněji stimulována k růstu.

UPEVNĚNÍ VARIANTA II – Prodloužení předkožky proporcionálně k penisu: Aby předkožka rostla jen tak jako penis, stáhněte předkožku zpět a položte komfortní pásek přímo za žalud kolem penisu. Tímto způsobem je kůže slaběji natahována a méně stimulována k růstu než ve variantě upevnění I.
- 3] Položte třmenový držák přes komfortní pásek tak, aby anatomicky tvarované zakřivení v třmenovém držáku (mezi oběma „oušky“) směřovalo k žaludu.

Pokud je to příjemné, je možné komfortní pásek omatit kolem penisu vícekrát, jinak odpovídajícím způsobem zkrátit nebo také vynechat.
- 4] Nasad'te oba konce třmenového držáku opět do drážek opěrné plochy. Aby se zabránilo sevření kůže do drážek opěrné plochy, vložte mezi penis a opěrnou plochu prst. Utáhněte pevně konce třmenového držáku a následně vytáhněte prst.
- 5] Penis je nyní fixován na opěrné ploše. [!] *Vyvarujte se nadměrného přimáčknutí penisu!* Pokud by penis nebo žalud změnil barvu, uvolněte, prosím, okamžitě třmenový držák a podporujte cirkulaci krve masáží. Sledujte zvlášť v prvních dnech fáze zvykání, zda upozorujete negativní změny ve vzhledu nebo funkci penisu a udělejte přestávku, dokud příznaky neodezní.
- 6] Přitlačte opěrnou plochu s upnutým penisem na konce tyček.
- 7] Přístroj můžete nosit se stejně dobrým výsledkem podle volby směrem nahoru nebo dolů.
- 8] Regulujte napínací sílu PeniMaster® vyšroubováním závitů (viz též následující bod „Nastavení napínací síly“).

NASTAVENÍ NAPÍNAČÍ SÍLY

Na konci upevňovacích tyček je vždy 5 VYRYTÝCH ZNAČEK V KOVOVÝCH TYČKÁCH.

Tyto ukazují na principu péroových vah, jak je silná napínací síla, působící na penis:

ZNAČKY

1 ~230 g* 2 ~460 g* 3 ~690 g* 4 ~920 g* 5 ~1150 g*

Příklad pro odečtení péroových vah: Pokud přístroj např. po nasazení pruží tak daleko, že můžete vidět již jen 3 z 5 značek, je nastavená napínací síla mezi 460 g a 690 g. Můžete-li vidět již jen poslední značku, je napínací síla mezi 920 g a 1150 g.

Pro zvýšení protažení penisu otáčejte prosím, oba nastavovací šrouby rovnoměrně proti směru hodinových ruček. Tím se zvyšuje celková délka přístroje. Pro snížení napínací síly otáčejte nastavovací šrouby v opačném směru [ve směru hodinových ruček].

Upozornění: Šroubový závit se smí vyšroubovat až tehdy, když je penis správně zvolenou délkou tyček (viz výše) již lehce natažený. Jinak není možné vytvořit napínací sílu nebo jen nedostatečnou! Nastavte napínací sílu na začátku terapie jen slabou (např. mezi 0 g a 230 g), abyste si na přístroj zvykli. Toto může trvat až dva ty dny. Optimálně Váš penis trénujete, když vždy nastavíte nejvyšší možnou tažnou sílu, se kterou můžete přístroj bez problémů nosit 60–90 minut.

Upozornění: Pokud by se penis po určité době po nasazení protáhl a tím by došlo k oslabení napínací síly, proveďte, prosím nastavení tažné síly! Pomalu v průběhu týdnů zvyšujte pomalu napínací sílu, až pokud možno vidíte na péroových vahách jen jednu značku. Vyskytnou-li se bolesti, nastavte prosím, PeniMaster® slaběji!

NADMĚRNÉ NEBO BOLESTIVÉ UPEVŇOVACÍ A NAPÍNAČÍ SÍLY MOHOU MÍT NEPŘÍZNIVÝ VLIV NA RŮST BUNĚK!

[!] Zatížení nad 1150 g byste z bezpečnostních důvodů neměli nastavovat ani tehdy, máte-li pocit, že nemáte problémy.

DOBA NOŠENÍ

PeniMaster® byste měli nasazovat denně minimálně na 3 hodiny. Delší doby nošení zlepšují výsledek! Vždy po 60 až 90 minutách dělejte přestávku přibližně 15 Minut a masírujte penis, abyste stimulovali prokrvení. Tyto krátké přestávky podporují proces růstu!

PeniMaster® – můžete po dostatečné době zvykná – nosit denně libovolně dlouho pod volným oděvem (prosíme, pamatujte na přestávky po každý ch 60 až 90 minutách!). Doby nošení 6 nebo více hodin denně vedou k optimálním výsledkům růstu. V zásadě neexistuje časové omezení, kolik měsíců můžete maximálně PeniMaster® používat. Naopak: Čím déle PeniMaster® nosíte, tím zřetelnější je výsledek. Minimum pro viditelný úspěch je doba nošení přibližně 3 hodiny denně po dobu jednoho měsíce. Výsledky, dosažené v průběhu prvních čtyř týdnů, mohou být zčásti výsledkem roztažení tkáně a nejsou popřípadě trvalé. Protože během spánku nelze dělat přestávky, nošení se nedoporučuje a mělo by se zvažovat jen tehdy, nelze-li jinak dosáhnout dostatečné doby nošení. Před aplikací ve spánku musí uživatel získat dostatečné zkušenosti s nastaveními, která jsou pro něj vhodná pro nošení po dobu více hodin v bdělém stavu.

Nemějte obavy o Váš dobrý výsledek, nemůžete-li PeniMaster® několik dnů nebo i delší dobu nosit, například jste-li na cestách: Růst, dosažený do této doby zůstane zachován a pokračuje, když opět zahájíte aplikaci. A pamatujte, prosím, že aplikace nechává Váš penis růst – a to přirozeně vyžaduje čas! Mějte sebedůvěru a neztrácejte trpělivost, neuvíďte-li po několika málo dnech žádný výsledek: Za Vaši vytrvalost budete odměněni „penisem na míru“!

HYGIENICKÉ POKYNY

Aby Vám Váš PeniMaster® dlouho dělal radost, očistěte prosím, Váš penis a PeniMaster® před a po každém použití vlažnou vodou a mýdlem. Následně penis a přístroj dobře osušte. Toto slouží všeobecné hygieně, předchází zánětům a usnadňuje kromě toho fixaci penisu třmenovým držákem. Tento rychleji sklouzává z penisu působením tělesných tuků nebo mastných prostředků pro ošetřování.

Přístroj nerezaví a ve vodě nedojde k jeho poškození.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO APLIKACI A VÝSTRAŽNÉ POKYNY

Trvalé vedlejší účinky v důsledku aplikace PeniMaster® nejsou známy. Během aplikace jsou lehká zarudnutí kůže v oblasti třmenového držáku z důvodu mechanického namáhání normální. Tato jsou nebolestivá a po odložení PeniMaster® opět rychle odeznívají.

Po aplikaci PeniMaster® může být výhodné, potřít penis hydratačním pleťovým mlékem, pro uvolnění pokožky.

Prosíme, dodržujte následující preventivní opatření a výstražné pokyny:

PENIMASTER® SE NESMÍ POUŽÍVAT

- pod vlivem alkoholu
- pod vlivem drog
- pod vlivem uklidňujících prostředků
- pod vlivem prostředků pro spaní nebo prostředků, které snižují vnímaví bolesti
- při známé alergii na chrom a při nesnášenlivosti polykarbonátu (PC) a TPE
- při známých problémech s penisem, varlaty nebo močovou trubicí
- při ochablosti tkáně cév a vazivové tkáně
- při přetrvávajících nebo vzniklých bolestech v penisu nebo varlatech
- u penisu s implantáty

Vyskytnou-li se při aplikaci PeniMaster® náhle bolesti, barevné změny nebo jiné zevní iritace nebo funkční změny penisu, žaludu nebo varlat, musí se aplikace ihned přerušit a pokračovat až po odeznění. Pokud by příznaky po přerušení aplikace přetrvávaly nebo se zhoršovaly, je nutné preventivně vyhledat lékaře (např. urologa). Pokud by z důvodu tělesných omezení nebo známé nemoci nebylo jisté, zda je aplikace PeniMaster® pro Vás vhodná, zeptejte se, prosím, před samostatným použitím Vašeho lékaře (urologa).

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за покупку аппарата ПениМастер®. Благодаря этому аппарату Вы выбрали единственно известный принцип, чтобы изменить Ваш половой член безболезненно и определенно долговременно без применения рискованной операции. Если Вы используете аппарат ПениМастер® в соответствии с этим руководством по применению, тогда Ваш половой член станет длиннее и более толстым как в расслабленном состоянии, так и в состоянии эрекции. Кроме того, аппарат ПениМастер® годится для исправления нежелательной кривизны полового члена и также выборочно для удлинения крайней плоти (например, для пользователей с обрезанной крайней плотью).

Вы можете самостоятельно без всяких проблем использовать аппарат ПениМастер® без помощи третьего лица (например, врача). Аппарат ПениМастер® добивается одинаково хороших успехов как у пользователей с обрезанной крайней плотью, так и у пользователей с необрезанным половым членом. Аппарат ПениМастер® является профессиональным медицинским прибором и годится для любого возраста. Тем не менее, мы рекомендуем применение этого прибора только при достижении совершеннолетия, чтобы перед его применением половой член уже достиг своей естественной длины.

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Принцип функционирования аппарата ПениМастер® является простым: В результате длительного воздействия вытяжения в течение длительного времени клеточная ткань полового члена стимулируется к росту: Возникают новые клетки организма, половой член становится длиннее и толще. Нерегулярные распределения ткани в половом члене – причины кривизны полового члена – компенсируются посредством новой ткани: Половой член становится прямым. Крайняя плоть может с помощью аппарата ПениМастер® вытягиваться сильнее чем остальной половой член. Таким образом, в случае необходимости также является возможным удлинение крайней плоти (смотри руководство).

Указание: несмотря на то, что половой член выглядит более худым во время вытяжения, после применения он будет вновь иметь свой первоначальный объем или станет еще более толстым!

Медицина успешно использует принцип роста с помощью вытяжения, например, также в ортопедии или в кожной хирургии, где также применяются специальные аппараты для вытяжения.

Впрочем, возможность удлинения полового члена посредством длительного вытяжения используется уже в течение столетий: Племя Карамойонг (местные уроженцы в Северной Уганде) или племя Садхус (Индия) достигают с помощью прикреплений веса к половому члену впечатляющих результатов (сравни Энциклопедия Британика; журнал «Штерн» № 49/95).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ПЕНИМАСТЕР®

ПРИМЕНЕНИЕ

Успех применения аппарата ПениМастер® зависит, с одной стороны, от силы вытяжения, действующей на половой член, а с другой стороны – от длительности применения. Только хороший баланс между силой вытяжения и длительностью ношения обеспечивает оптимальные результаты! *[!] В принципе при ношении аппарата ПениМастер® у Вас должны всегда возникать приятные ощущения, но ни в коем случае болезненные! Боли являются достоверным признаком ошибочного применения, например, при чрезмерно сильных силах вытяжения или прикреплении, установленных на аппарате!*

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К НАДЕВАНИЮ

- Оттяните поддерживающую поверхность от удерживающих стержней.
- Вытяните удерживающий ремень из прорезей поддерживающей поверхности. **ВАЖНО: При этом нажмите обоими фиксирующими лопастями на нижнюю сторону удерживающей поверхности. В противном случае может быть поврежден удерживающий ремень. Это также относится к снятию после применения!**
- Завинтите винты с тонкой регулировкой на самой малой высоте (так чтобы больше не была видна винтовая резьба).
- Установите правильную общую длину аппарата (приблизительно соответствующую длине Вашего полового члена в возбужденном состоянии плюс 1,5 см) посредством удаления, замены или привинчивания друг к другу прилагающихся телескопических стержней. Стержни имеют длину в 2, 4, 6 и 8 см и могут соответственно привинчиваться друг к другу. Это позволяет устанавливать следующие возможные размеры удлинения: 10 см (стержни 8+2); 12 см (8+4); 14 см (8+6); 16 см (8+2+6); 18 см (8+4+6); 20 см (8+2+4+6).
[!] Шесть миниатюрных стержней (в поставке к двум стержням по 1,5 см соединенных на винтах) служат для точного регулирования на +0,5, +1,0 или +1,5 см.

НАДЕВАНИЕ АППАРАТА ПЕНИМАСТЕР®


- Растягивайте рукой половой член в течение приблизительно одной минуты. Введите половой член в расслабленном состоянии в насадку.
- ВАРИАНТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ I** – более сильное удлинение крайней плоти: Чтобы дать увеличиться крайней плоти сильнее или сверхпропорционально по отношению к половому члену (например, чтобы восстановить крайнюю плоть при половом члене с обрезанной крайней плотью), наложите поясok комфорта на половой член на оставшуюся крайнюю плоть, при необходимости с небольшим расстоянием к головке полового члена. Таким образом, кожа будет более интенсивно вытягиваться и будет сильнее стимулироваться к росту. **ВАРИАНТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ II** – удлинение крайней плоти пропорционально к половому члену: Чтобы дать увеличиться крайней плоти пропорционально к половому члену, оттяните крайнюю плоть назад и наложите поясok комфорта на половой член непосредственно позади головки полового члена. Таким образом, кожа будет слабее вытягиваться и будет меньше стимулироваться к росту по сравнению с вариантом закрепления I.
- Установите удерживающий ремень на поясok комфорта так, чтобы анатомически сформированная кривизна в удерживающем ремне (между обоими «ушками») указывала в направлении головки полового члена. Если это приятно, поясok комфорта может многократно обертываться вокруг полового члена, в противном случае он должен соответственно укорачиваться или отпускаться.
- Вновь вставьте оба конца удерживающего ремня в прорези поддерживающей поверхности. Теперь, пожалуйста, поставьте палец между половым членом и поддерживающей поверхностью, чтобы избежать защемления кожи в прорезях поддерживающей поверхности. Крепко затяните концы удерживающего ремня и затем уберите палец.
- Теперь Ваш половой член закреплен на удерживающей поверхности.
[!] Избегайте чрезмерного придавливания Вашего полового члена! Если половой член или головка полового члена изменили цвет, пожалуйста, немедленно расслабьте удерживающий ремень и с помощью массажа способствуйте циркуляции крови. В особенности в первые дни фазы привыкания обращайтесь внимание на то, заметили ли Вы негативные изменения во внешнем виде или функционировании Вашего полового члена, и если негативные изменения появились, сделайте перерыв в применении аппарата до тех пор, пока симптомы не исчезнут.
- Нажмите поддерживающую поверхность с вставленным половым членом до конца стержней.
- Вы можете носить аппарат по Вашему усмотрению: вверх или вниз, с одинаково положительным результатом.
- Регулируйте силу вытяжения аппарата ПениМастер® с помощью вывинчивания винтовой резьбы (смотри также следующий пункт «Установление силы вытяжения»).

УСТАНОВЛЕНИЕ СИЛЫ ВЫТЯЖЕНИЯ

На конце удерживающих стержней располагаются соответственно **5 насеченных разметок на металлических стержнях.**

Основываясь на принципе пружинного динамометра, они показывают величину силы вытяжения, оказываемой на половой член:

Маркировка

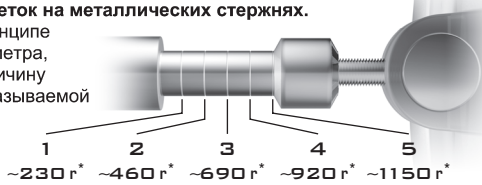

Пример снятия показаний с пружинного динамометра: Если аппарат, например, после одевания, выдвигается на столько, что Вы можете видеть только 3 из 5 разметок, в этом случае установленная сила вытяжения равняется между 460 г и 690 г. Если Вы можете видеть только последнюю разметку, в этом случае сила вытяжения равняется между 920 г и 1150 г.

Указание: Винтовую резьбу разрешается только тогда вывинчивать, когда половой член уже будет слегка удлиняться с помощью выбора правильной длины стержней (смотри выше). В противном случае может вообще не создаваться никакой силы вытяжения или может создаваться сила вытяжения, которой будет явно недостаточно! В начале применения аппарата устанавливайте только слабую силу вытяжения (например, между 0 г и 230 г), чтобы привыкнуть к аппарату. Это может длиться в течение двух недель. Вы оптимально тренируете Ваш половой член, когда Вы всегда устанавливаете максимальную силу вытяжения, при которой Вы можете носить без всяких проблем аппарат в течение 60-90 минут.

Указание: Если через некоторое время Ваш половой член удлиняется после надевания и таким образом сила вытяжения становится более слабой, тогда, пожалуйста, подрегулируйте силу вытяжения! Увеличивайте силу натяжения медленно в течение недель, пока Вы не будете видеть самое большое только одну разметку на пружинном динамометре. При возникающих болях, пожалуйста, устанавливайте аппарат ПениМастер® на более слабую силу вытяжения!

ЧРЕЗМЕРНЫЕ ИЛИ БОЛЕЗНЕННЫЕ СИЛЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ И ВЫТЯЖЕНИЯ МОГУТ ИМЕТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА РОСТ КЛЕТОК!

[!] По причинам безопасности Вы также не должны устанавливать нагрузки свыше 1150 г, даже если Вы чувствуете, что с этим у Вас не будет никаких проблем.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОШЕНИЯ

Вы должны ежедневно носить аппарат ПениМастер® как минимум в течение 3 часов. Более длительное время ношения улучшает результат! Пожалуйста, по прошествии соответственно от 60 до 90 минут делайте небольшой перерыв около 15 минут и массируйте Ваш половой член, чтобы стимулировать кровоснабжение. Эти короткие перерывы содействуют процессу роста!

Вы можете носить аппарат ПениМастер® – после достаточного времени привыкания – под просторной одеждой ежедневно в течение продолжительного времени (пожалуйста, не забывайте делать перерывы после каждых 60-90 минут!). Время ношения от 6 или более часов ежедневно приводит к оптимальным результатам роста. В принципе не существует никаких временных ограничений, сколько месяцев максимально Вы можете применять аппарат ПениМастер®. Напротив: Чем дольше Вы будете носить аппарат ПениМастер®, тем более отчетливо будет виден результат. Минимальным временем ношения аппарата для очевидного успеха является время около 3 часов ежедневно в течение одного месяца. Результаты, которые будут достигнуты в течение первых четырех недель, могут частично базироваться на удлинении ткани и при данных условиях не являются долговременными. Так как во время сна невозможно делать перерывы в ношении аппарата, то при этом не рекомендуется применение аппарата и это должно приниматься в расчет только тогда, если в противном случае невозможно достичь достаточного времени ношения. Перед использованием аппарата во время сна пользователь уже должен иметь достаточно опыта с установками,

подходящими ему, для использования аппарата, продолжающегося несколько часов, в состоянии бодрствования.

Не беспокойтесь о Вашем хорошем результате, если Вы иногда не можете носить аппарат ПениМастер® в течение нескольких дней или более длительного периода времени, например, если Вы находитесь в поездках: Рост, который был уже достигнут в течение прошедшего времени, останется прежним и будет продолжаться, как только Вы вновь возобновите использование аппарата. И, пожалуйста, помните о том, что этот метод поможет Вашему половому члену **увеличиться** – только для этого, естественно, потребуется время! Будьте более оптимистичны и не теряйте терпения, когда по прошествии нескольких дней Вы не увидите видимых результатов: Вы будете вознаграждены за проявление силы воли „половым членом по индивидуальному заказу“!

УКАЗАНИЯ ПО ГИГИЕНЕ

Чтобы аппарат ПениМастер® доставлял Вам длительное удовольствие, пожалуйста, мойте Ваш половой член и аппарат ПениМастер® с помощью теплой воды и мыла перед и после каждого использования. Затем хорошо высушите Ваш половой член и аппарат. Это служит в целях общей гигиены, предупреждает воспаления и, кроме того, облегчает закрепление полового члена с помощью удерживающего ремня. Он быстрее соскальзывает с полового члена с помощью жира тела, пудры или продуктов по уходу за телом, содержащих жир. Аппарат является коррозиестойчивым и поэтому не повреждается при соприкосновении с водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продолжительные побочные эффекты при использовании аппарата ПениМастер® не выявлены. В течение использования аппарата легкие покраснения кожи в области ношения удерживающего ремня являются нормальным явлением по причине механической нагрузки. Они не являются болезненными и вновь быстро проходят после снятия аппарата ПениМастер®.

После использования аппарата ПениМастер® может быть целесообразным нанесение на половой член увлажняющего лосьона, чтобы расслабить кожу.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие меры предосторожности и предупреждения:

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ ПЕНИМАСТЕР®

- при алкогольном опьянении
- при наркотическом опьянении
- при использовании успокоительных средств
- при использовании снотворного средства или средств, ослабляющих чувствительность к болевым ощущениям
- в случае известной сенсibilизации к хрому и при непереносимости поликарбоната (PC) и термопластичных эластомеров (TPE)
- при известных проблемах с половым членом, яичками или мочеиспускательным каналом
- в случае слабостей в венах или соединительных тканях
- в случае существующих или возникающих болей в половом члене или яичках
- в случае имплантатов полового члена

Если в течение использования аппарата ПениМастер® неожиданно появляются боли, цветные изменения или прочие наружные раздражения или функциональные изменения полового члена, головки полового члена или яичек, немедленно приостановить использование аппарата и продолжать только после их ослабления. Если после приостановления использования симптомы продолжают держаться или ухудшаются, тогда в целях предосторожности следует обратиться к врачу. Если по причинам телесных ограничений или известного заболевания Вы не совсем уверены, подходит ли Вам использование аппарата ПениМастер®, пожалуйста, перед самостоятельным использованием аппарата проконсультируйтесь у Вашего врача (уролога).